



Istruzioni d'uso

DIP & BRUSH K2 Liquido per zirconio



PRIMARDENT S.a.s. di Riva Riccardo Filippo & C. - dal 1950 il nome per il dentale

Via della Resistenza, 65 - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 0245701137 - fax 0245703560 - info@primardent.it - www.primardent.it

Tecnica di immersione



Immergere la parte di restauro fresata in zirconio con una pinzetta di plastica nel liquido per zirconio K2.

Non utilizzare mai pinzette di metallo. La parte restaurata deve essere completamente coperta dal liquido e rimanere 1-2 minuti completamente in immersione. Quindi rimuovere delicatamente con una pinzetta di plastica e tamponare con un pezzo di carta assorbente o con un cotton fioc.



Tecnica di colorazione

Step 1

- Pitturare più volte la superficie interna della corona con il colore dentina più appropriato e secondo l'intensità desiderata (3 - 5x)


Esempio di lavorazione di un molare superiore

Esempio di lavorazione di un dente incisivo

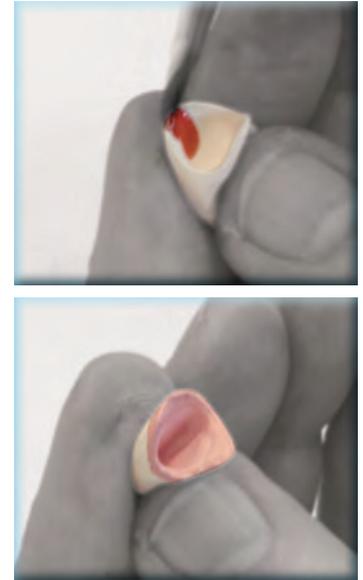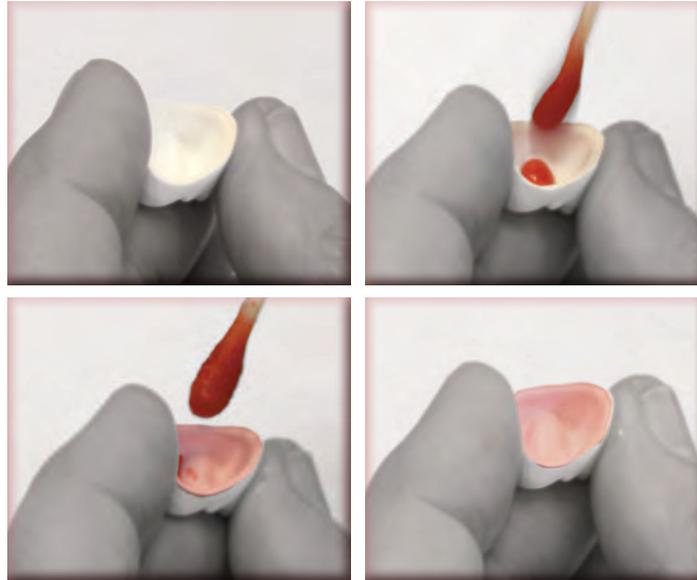


Step 2

- Pitturare la zona cervicale e i particolari di dettaglio secondo la situazione del paziente con un colore leggermente più scuro

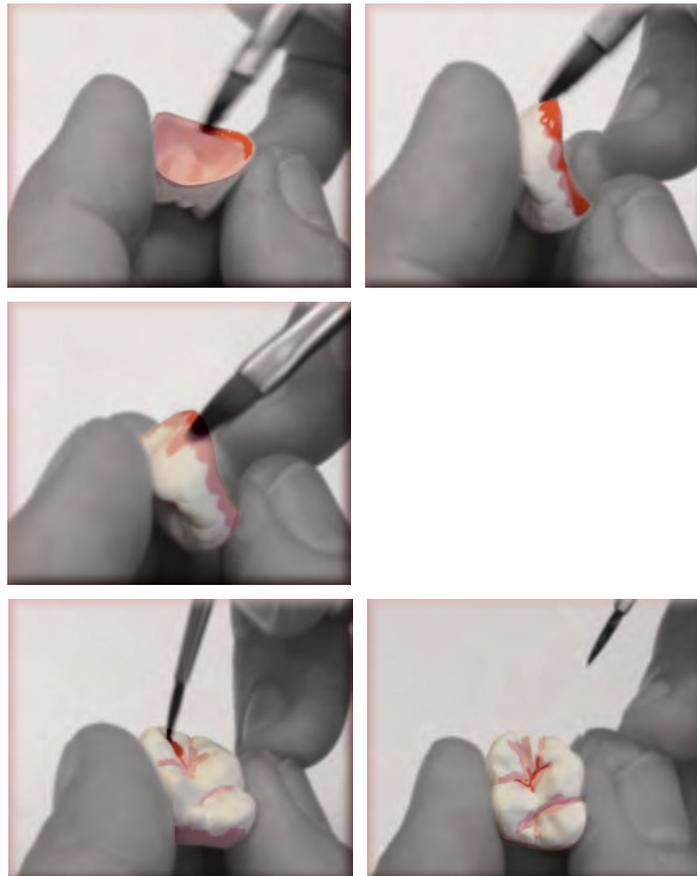


Step 3

- Pitturare la zona della dentina con il colore di fondo: mammelloni, superfici prossimali, cuspidi abrase

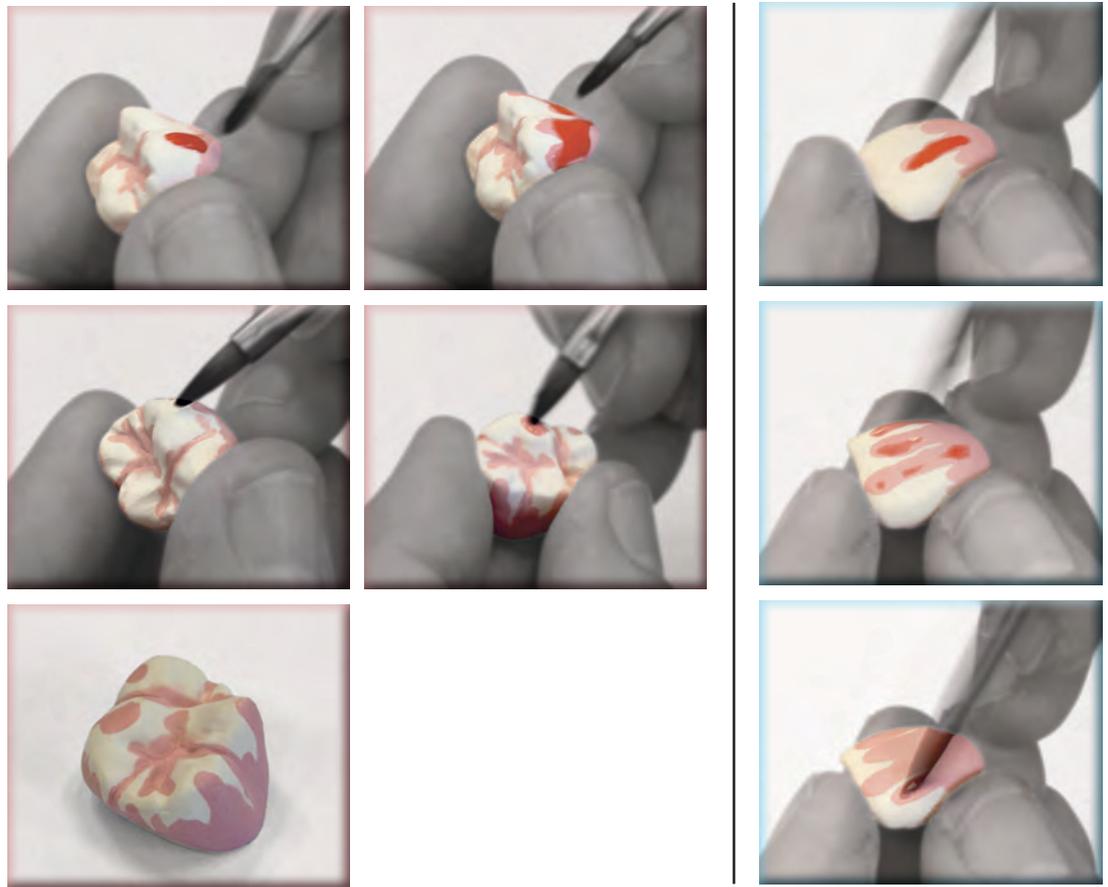

Step 4

- Nella zona dello smalto incisale pitturare in blu (BL1) e in grigio (GR3) conformemente alla dentatura del paziente
- CONSIGLIO: nell'area vestibolare dei frontali pitturare i canali incisali alternativamente

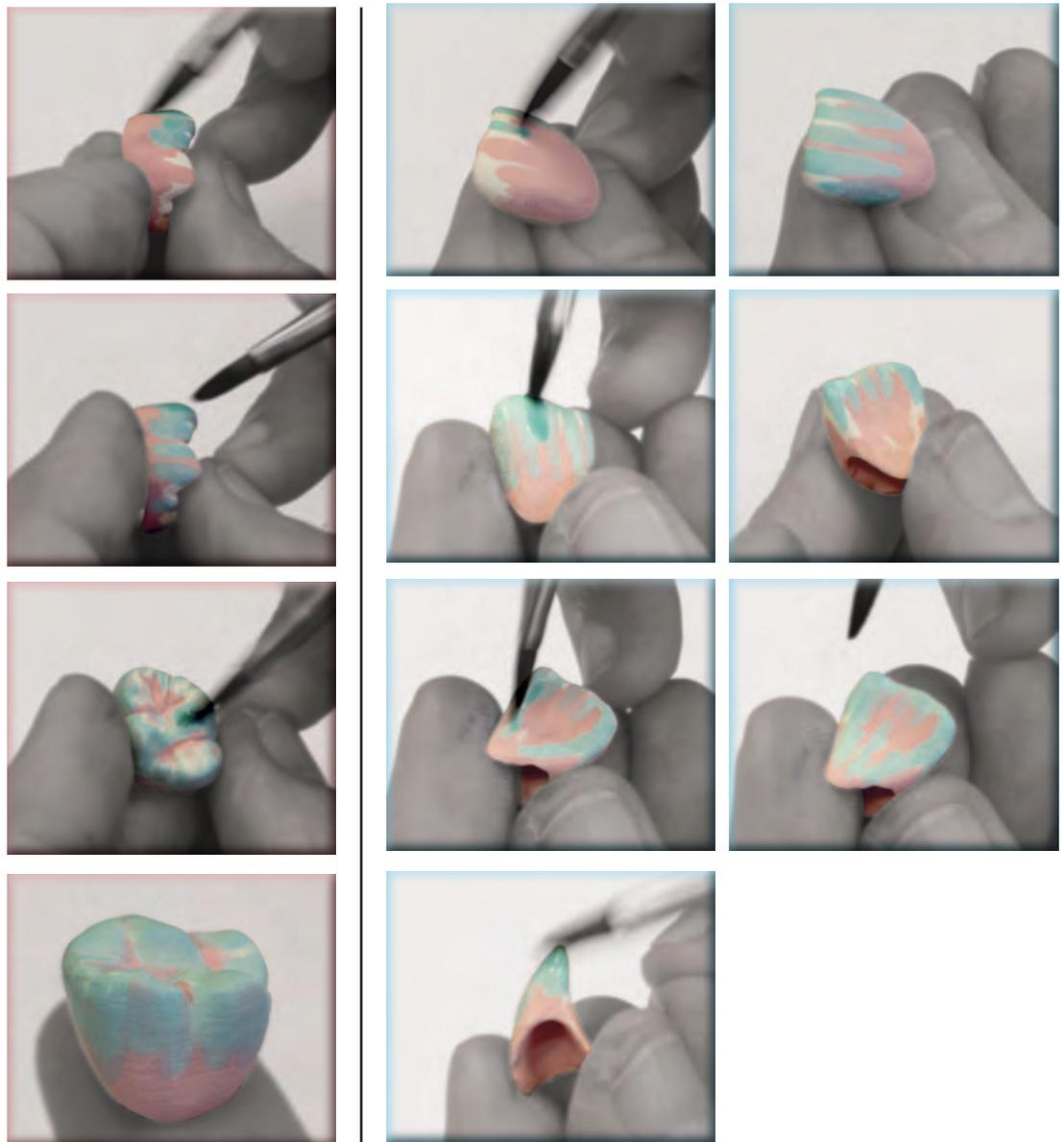



Aspetto della lavorazione dopo la fase di pittura



Aspetto della lavorazione dopo l'asciugatura



Lavorazione completamente asciutta prima della sinterizzazione con il forno YETI SINT



YETI SINT Art.N. 483-0000



Dopo la sinterizzazione



Dopo la colorazione con gli Stain e la rifinitura con la pasta per glasura



Caramisla O/B Art.N. 312-4000



Stain Humidor Art.N. 312-0001



Stain Art.N. 340-0201/0210



K2 Glasur Art.N. 336-0010



DIP & BRUSH K2 Liquido per zirconio, 100 ml

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A1 = Art.-Nr. 397-5001 | C2 = Art.-Nr. 397-5011 |
| A2 = Art.-Nr. 397-5002 | D2 = Art.-Nr. 397-5014 |
| A3 = Art.-Nr. 397-5003 | BL1 = Art.-Nr. 397-5017 |
| A3,5 = Art.-Nr. 397-5004 | GR3 = Art.-Nr. 397-5019 |
| B2 = Art.-Nr. 397-5007 | |

