

G - CAD / CAM

(estratto dal catalogo 2018 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it)

2	Gessi per Modelli da Scansione CAD
2	Materiali di Contrasto
4	Materiali di consumo / Accessori
7	Frese e Gommini
9	Blocs in PMMA e Composito
12	Blocs in Zirconio
17	Blocs in ceramica
28	Blocs in Metallo
29	Dischi in Zirconio
41	Dischi in Composito
42	Dischi PMMA e Resine
46	Dischi in Peek e Poliuretano
47	Dischi in Fibra di vetro
48	Dischi in metallo
50	Dischi Calcinabili
52	Metallo in polvere per Laser Sinterizzazione
53	Coloranti
59	Forni per sinterizzazione





Visio Rock Chemident



Cam Stone N Ernst Hinrichs



Esthetic-Base Gold Dentona



Scanspray Renfert



Gessi per modelli da scansione CAD

Visio-Rock Chemident

Gesso tipo IV per modelli Cad-Cam, marroncino.

Visiorock è un gesso appositamente studiato per la rilevazione optoelettronica dei modelli con il sistema CAD/CAM, ma al contempo con le caratteristiche di un ottimo gesso per protesi fissa

VISIO ROCK		euro	codice
Marroncino	secchio 7Kg.	61,00	

Cam Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un alta resistenza alla trazione.

Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo ceramica, per modelli dimostrativi.

CAM-STONE N		euro	codice
ROSSO MARRONE	sacchetto 5 kg	31,10	00094063
AVORIO	sacchetto 5 kg	31,10	00094065

Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile.

Esthetic Base Gold è certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

ESTHETIC-BASE GOLD		euro	codice
GIALLO ORO	conf. 5 kg	33,90	00075584

Materiali di contrasto

Scanspray Renfert

Adatto per tutti i sistemi con scanner ottico e, grazie alla tecnica di nebulizzazione a secco, è idoneo anche per la scansione delle impronte. Consente la rilevazione dettagliata, precisa e integrale dell'oggetto eliminando i difetti causati dalla rifrazione della luce. La nebulizzazione a secco ottimizzata (ugello di precisione combinato a pigmenti micro polverizzati) consente, al contrario degli spray con vettori liquidi, di ricoprire la superficie dell'oggetto con uno strato sottilissimo e omogeneo. È quindi utilizzabile anche sulle superfici concave presenti nelle impronte, altrimenti difficili da trattare. Non forma pozze di liquido per risultati di alta qualità.

SCANSPRAY		euro	codice
flacone spray da 200 ml		59,00	00094817

ScanInk Spray Harvest Dental

Crea uno strato sottilissimo per la massima precisione possibile.

Applicazione mirata utilizzando il pennello o lo spray. Facile da rimuovere e ad asciugatura rapida.

SCANINK SPRAY		euro	codice
flacone 250 ml + flacone spray e pennello		42,00	00110506



Hinri-Scan Spray Ernst Hinrichs



Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs



Cerec Vita



Scan Spray PX Dental



Spray Scan Aurotre



Materiali di contrasto

Hinri-Scan Spray Ernst Hinrichs

Spray scansibile per tutti i gessi dentali. L'ugello finissimo consente una nebulizzazione sottile ed uniforme anche nei bordi più sottili. Lavabile con getto di vapore. Colore bianco.

HINRI-SCAN SPRAY		euro	codice
STANDARD	flacone da 50 ml	35,30	00098420

Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs

Lacca antiriflettente scansionabile con tutti sistemi CAD e per tutti gessi dentali. Opaca e lavabile. Liscia le superfici che devono essere scansate, utilizzabile solo per l'applicazione nel laboratorio. Colore: avorio.

HINRI-SCAN LACCA		euro	codice
AVORIO	flacone da 20 ml	24,60	00098422

Sistema Contrasto CEREC Vita

Polvere di contrasto bianca per eliminare riflessi dalla superficie del dente per l'impronta ottica. Propellente spray privo di CFC, per l'applicazione della polvere VITA CEREC sul dente, da utilizzare con la cannula nebulizzatrice per propellente, ruotabile a 360°.

VITA CEREC PER CONTRASTO		euro	codice
POLVERE PER CONTRASTO	flacone 12 gr	14,40	00054730
LIQUIDO	flacone 6 ml	19,70	00086574
PROPELLENTE SPRAY	flacone 250 ml	24,00	00054728
CANNULA FLACONE PROPELLENTE	conf. 1 pz	26,00	00054729

Scan Spray PX Dental

Spray antiriflesso

SCAN SPRAY	euro	codice
Flacone spray 400ml.	55,00	1039462

Spray Scan Aurotre

Spray antiriflesso

SPRAY SCAN	euro	codice
Flacone spray 400ml.	45,00	001331

Scan Spray Larident

Scanspray lab viene impiegato per ottenere riprese molto precise su restauri con sistemi cad/cam. Con Scanspray lab si compensano diverse caratteristiche ottiche del modello in gesso permettendo quindi la ripresa con lo scanner. Grazie al nebulizzatore, con una leggera erogazione del prodotto si ottiene un strato coprente ottimale con una dettagliata rappresentazione dei bordi.

SCAN SPRAY	euro	codice
flacone da 200 ml	42,10	00105933

Telescan Spray Apex Dental

Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo. Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione ottica trasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica CAD-CAM. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol. Si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

TELESCAN SPRAY	euro	codice
BIANCO flacone da 75 ml	24,30	00068224

Materiali di consumo



Scanwax Yeti

Scanwax Yeti

Cera da modellare leggermente opaca, specifica per la lettura con sistemi CAD/CAM. L'elevata stabilità dimensionale garantisce la massima precisione nella riproduzione dei dettagli.

SCANWAX	euro	codice
Cera confezione 45gr.	15,80	729-5000



BionB Bionah

BionB Bionah

La resina BionB è un materiale di modellazione fotoindurente e serve per la modellazione di cappette e corone.

BIONB RESINA PER MODELLAZIONE	euro	codice
Gel trasparente conf. 5 siringhe da 3 gr	63,80	00096693



Zr Cut

Zr Cut

Dischi separatori ultrasottili in fibra di vetro per Zirconia.

ZR CUT	euro	codice
Zr Cut Ø 20mm / spess. 0,20mm 10 pz.	45,00	
Zr Cut Ø 20mm / spess. 0,30mm 10 pz.	45,00	



Legabril Diamond PX Dental

Legabril Diamond PX Dental

Pasta diamantata per la Lucidatura di strutture in Zirconia

- Lucidatura assoluta su zirconia, metalli e compositi
- Consistenza cremosa che si adatta a strumenti e superfici
- Finitura brillante e rapida

LEGABRIL DIAMOND	euro	codice
Vasetto 50 gr.	35,00	PPXD90008



Zirkopol Feguramed

Zirkopol Feguramed

Pasta per lucidare Ceramica e Zirconia, colore grigio.

- Per la prelucidatura e lucidatura finale brillante
- Prelievo ottimale della pasta con la ruota di feltro
- Eccellente lucentezza con il disco di cotone

ZIRKOPOL	euro	codice
Vasetto 30 gr.	60,65	



Pearl Surface Kuraray

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

PEARL SURFACE Z	euro	codice
conf. 20 gr	62,90	00099905



Nacera Shine ZR Nacera

Pasta diamantata per zirconia, contiene un elevato contenuto di diamante e un'ottima consistenza. Può essere utilizzata per la pre-lucidatura con spazzole dure standard o per la lucidatura a specchio con spazzole in pelo capra o filo cotone.

PASTA PER LUCIDATURA SHINE ZR	euro	codice
vasetto da 14 gr	90,00	00117224

IvoBase CAD Bond Ivoclar Vivadent

Sistema di incollaggio bicomponente basato su **PMMA**. Viene utilizzato per giunzioni prefabbricate affidabili di denti e basi per protesi realizzate in CAD IvoBase. Colore rosa universale e disponibile in kit. Le unità predosate sono sufficienti per la fabbricazione di 10 protesi e consentono un pretrattamento pulito.

IVOBASE CAD BOND	74,50	00123128
<i>conf. 10 x IvoBase CAD Bond Polymer (1,75 g) + 10 IvoBase CAD Bond Monomer (1,9 ml) + 1 IvoBase CAD Bond Modeling Liquid (5 ml) + 20 siringhe per applicazione + 10 cannule</i>		

URC Universal Resin Cement Bioloren

Cemento duale, a rilascio di fluoro, radiopaco e idrofilo; ideale per la cementazione di tutte le superfici come: polietilene (in fibra), metalli preziosi e non, ceramiche, zirconia, resine acriliche, fibre di vetro e di carbonio. Ideale per la cementazione di ponti, corone, inlays, onlays e per ogni altro tipo di ricostruzione.

URC CEMENTO UNIVERSALE	euro	codice
siringa da 7 gr + 10 puntali	94,00	00111705

Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent

Cemento composito autoindurente per l'incollaggio definitivo di strutture in vetroceramica al disilicato di litio (LS2) o all'ossido di zirconio su basi in titanio/lega in titanio o ossido di zirconio (es. incollaggio di abutment a base adesiva) per la realizzazione di abutment ibrido o di corona abutment ibrida. Presenta elevati valori di adesione per un legame affidabile e duraturo, due livelli di opacità HO 0 e MO 0 per un'estetica ottimale.

MULTILINK HYBRID ABUTMENT	euro	codice
HO 0 siringa automix da 9 gr	168,40	00097841
MO 0 siringa automix da 9 gr	168,40	00096328

Calibrate Set Nacera

Set di calibrazione per forni di sinterizzazione. Esso contiene un'unità di misurazione della temperatura e gli anelli di controllo.

CALIBRATE SET	euro	codice
conf. 1anello base + 15 anelli di calibrazione + 1 misuratore	280,00	00117222

Nacera Sfere Nacera

Sfere di zirconia stabilizzanti da utilizzare durante la sinterizzazione.
Ø 2 mm.

NACERA SFERE ZIRCONIA	euro	codice
vasetto da 200 gr	105,00	00111367



Multilink Hybrid Abutment Ivoclar Vivadent



Zirconia Accessori



P100 P110 P115
Adattatori per il Sistema Zirkozahn Zyttria Concept



Accessori per Zyttria Concept



Microcheck U.V. Concept

Accessori per Zyttria® Concept

ADATTATORI PER SISTEMA ZIRKONZAHN		euro	codice
ADATTATORE A MEZZALUNA	conf. 1 pz	30,00	00092691
ADATTATORE TONDO PER BLOCCHETTI	conf. 1 pz	30,00	00092692
ADATTATORE A MEZZALUNA PER CILINDRI	conf. 1 pz	30,00	00092693

TEST CONTROLLO TEMPERATURA FORNO SINTERIZZAZIONE		euro	codice
THERMOCECK RING	conf. 15 pz	60,00	00094968

ACCESSORI PER LA CERAMIZZAZIONE		euro	codice
SUPOORTO DI COTTURA A NIDO D'APE 55 x 55 / h 12.7 mm - per ceramizzazione	conf. 1 pz	20,00	00094970
SUPOORTO DI COTTURA A NIDO D'APE Ø 81 / h 12.7 mm - per ceramizzazione	conf. 1 pz	22,00	00094971
KIT PERNI IN ALLUMINA (3 perni Ø 2 mm + 3 perni Ø 3 mm + 3 perni Ø 5 mm)	conf. 9 pz	18,00	00094989

ACCESSORI PER LA SINTERIZZAZIONE		euro	codice
PIASTRA DI SINTERIZZAZIONE IN ALLUMINA 1 pz 85 x 95 spess. 8 mm		108,00	00094969
TAZZA ALLUMINA Ø 100 x h 30 mm	conf. 1 pz	108,00	00094075
COPERCHIO PER TAZZA ALLUMINA Ø 100 mm		30,00	00099401
TAZZA MULLITE tonda chiusa Ø 98 x h 30 mm		108,00	00102503
COPERCHIO PER TAZZA ALLUMINA Ø 98 mm		30,00	00102504
TAZZA MULLITE ALLUMINA rett. con piatto 87 x 55 x 85 mm		180,00	00101221
TAZZA MULLITE tonda chiusa Ø 87 x h40 (h coperchio 5mm.)		98,00	00106826
COPERCHIO PER TAZZA MULLITE tonda chiusa		25,00	00206828
MICROSFERE IN ALLUMINA	conf. 200 gr	36,00	00093872
MUFFOLA TONDA Ø 106 x h 30 mm	conf. 1 pz	44,00	00093873

Microcheck a Luce U.V. Concept

Sistema che permette di monitorare e rilevare microcricche molto sottile. Il metodo di basa sul fenomeno della capillarità e su caratteristiche fisiche dei liquidi quali la viscosità e la tensione superficiale. Questo metodo ottimo con la zirconia, può essere utilizzato su qualsiasi materiale che non sia poroso in superficie. E' utile per rilevare difetti affioranti in superficie, difetti in fusioni, di fabbricazione e di servizio come cricche di fatica o tenso-corrosione. Il liquido penetrante fluorescente è a base d'acqua, con una capacità di penetrazione molto elevata tale da garantire l'inserimento nelle fenditure sottili difficilmente individuabili al microscopio.

Confezione: Lampada UV + pinza + portabecker + 2 becker + liquido fluorescente da 50 cl.

MICROCHECK U.V.		euro	codice
LAMPADA UV		a richiesta	00094972
liquido fluorescente	flacone da 50 cl	36,70	00094973

Frese per Sistemi CAD/CAM



Frese per Silamill Siladent

FRESE DENTALI PER CERA E RESINE (PMMA) stop argento

fresa	Ø tagliente /	lunghezza tagliente /	codice SILAMILL 4	codice SILAMILL 5	prezzo
fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098937		25,00
fresa a candela a due taglienti	1.00	2.00	00098942		25,00
fresa a candela a due taglienti	2.00	2.00	00098944		20,00
fresa piana a due denti	1.20	5.00	00098943	00098963	25,00
fresa piana a un tagliente	2.50	5.00	00098945	00098965	25,00
fresa a candela a due taglienti premium	0.60	1.20		00122270	33,00
fresa a candela a due taglienti premium	1.00	2.00		00109378	33,00
fresa a candela a due taglienti premium	1.20	5.00		00110035	26,00

FRESE DENTALI PER NANOCOMPOSITI, CON SPECIALE RIVESTIMENTO, stop giallo

fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098946	00098967	31,00
fresa a candela a due taglienti	1.00	2.00	00098947	00098971	31,00
fresa a candela a due taglienti	2.00	2.00	00098949	00098973	26,00
fresa piana a due taglienti	1.20	5.00	00098948	00098972	31,00

FRESE DENTALI senza rivestimento con stop azzurro PER OSSIDO DI ZIRCONIO

fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098955	00098978	32,00
fresa a candela a due taglienti	1.20	5.00	00098959	00098981	27,00
fresa piana a due taglienti	2.00	4.00	00098958		32,00
fresa a candela a due taglienti premium	1.00	2.00	00109890	00109380	42,00
fresa piana a due taglienti premium	2.00	4.00		00109381	43,00

FRESE DENTALI senza rivestimento con stop verde PER OSSIDO DI ZIRCONIO

fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098950	00098974	25,00
fresa a candela a due taglienti	1.00	2.00		00098975	25,00
fresa a candela a due taglienti	1.20	5.00	00098954	00098977	20,00
fresa piana a due taglienti	2.00	4.00	00098953	00098976	25,00

FRESE DENTALI senza rivestimento con stop azzurro PER OSSIDO DI ZIRCONIO

codice SILAMILL 5

fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098982	78,00
fresa a candela a due taglienti	1.20	5.00	00098985	78,00
fresa piana a due denti	2.00	4.00	00098984	78,00
fresa a candela a due taglienti premium	1.00	2.00	00111338	98,00

FRESE DENTALI PER METALLI NON PREZIOSI a base di cromo-cobalto stop rosso

codice SILAMILL 4 e 5

fresa a candela a due taglienti	0.60	1.20	00098986	33,00
fresa a candela a due taglienti	1.00	3.00	00098987	33,00
fresa a candela a due taglienti	1.20	3.00	00098989	33,00
Fresa toroidale a due taglienti premium	2.00	4.00	00109926	43,00

Sistemi CAD/CAM

TC-Cutter (VZ65) per PMMA Edenta

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, nè facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.



	261	138	139	73	129	79	77
Ø $\frac{1}{10}$ mm	023	023	023	014	023	045	023
L mm	14.0	8.0	8.0	3.0	8.0	13.0	5.0
500 104...	194 145 023	198 145 023	289 145 023	277 145 014	114 145 023	1194 45 045	237 145 023
rpm	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	18.000/30.000	20.000/40.000
euro	17,35	17,35	17,35	13,60	17,35	23,70	17,35
codice	00103207	00103107	00103208	00103108	00103210	00103110	00103211

ExaStar Gommini per PMMA Edenta

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenere una lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.



	0612HP	0610HP	0614HP	0622HP	0620HP	0624HP
Ø $\frac{1}{10}$ mm	170	220	055	170	220	055
L mm	3.0	3.0	15.5	3.0	3.0	15,5
652 104...	372 524 170	303 524 220	243 524 055	372 514 170	303 514 220	243 514 055
rpm	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000
fase	1			2		
euro	16,95	16,95	6,55	16,95	16,95	6,55
codice	00103101	00103102	00103103	00103104	00103105	00103106

Blocs in PMMA

Telio CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetti in **PMMA** reticolato, per la realizzazione di provvisori a lungo termine mediante la tecnica CAD/CAM. (Permanenza massima in cavo orale 12 mesi). Da questi si possono realizzare corone, ponti e corone abutment ibride. Il processo di polimerizzazione industriale rende il materiale molto omogeneo. In questo modo Telio CAD è facilmente lavorabile. Prima della cementazione, si può scegliere se soltanto lucidare il restauro oppure se individualizzarlo con i supercolori e le masse da stratificazione del composito fotoindurente da laboratorio SR Nexco.

Indicazioni: corone e ponti provvisori; corone abutment ibride provvisorie.

Disponibili nei formati B40L, B55, A16S, A16L e in disco.



Telio CAD A16 for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent



Telio CAD for CEREC and inLab Ivoclar Vivadent



TELIO CAD FOR CEREC

euro codice

STARTER KIT

a richiesta 00080737

conf. 2 Telio Cad for Cerec/Inlab A1 B40L + 3 Telio Cad for Cerec/Inlab A2 B40L + 3 Telio Cad for Cerec/Inlab A3 B40L + 1 Telio CS Link Trasparent + 1 Telio CS desensitizer + 1 Optrapol (Testpack) + accessori

confezione 3 blocchetti

euro **92,70**

Colori	BL3	A1	A2	A3	A3.5	B1
A16(S)	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00101464	00101463	00101119	00101460	00101461	00101462
A16(L)	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00101459	00101458	00101239	00101455	00101456	00101457

confezione 3 blocchetti

euro **86,20**

Colori	BL3	A1	A2	A3	A3.5	B1
B40L/3	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00080744	00080745	00080746	00080747	00080748	00080749

confezione 9 blocchetti

euro **233,50**

Colori	BL3	A1	A2	A3	A3.5	B1
B40L/9	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00080738	00080739	00080740	00080741	00080742	00080743

confezione 1 blocchetto

euro **33,30**

Colori	BL3	A1	A2	A3	A3.5	B1
B55/1	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00080760	00080761	00080762	00080763	00080764	00080766

confezione 3 blocchetti

euro **90,45**

Colori	BL3	A1	A2	A3	A3.5	B1
B55/3	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00080767	00080768	00080769	00080770	00080771	00080772

Tetric CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetto in composito estetico per la realizzazione efficiente di restauri indiretti di denti singoli tramite la tecnologia CAD/CAM. Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Grazie al suo accentuato effetto camaleontico, i restauri in Tetric CAD si integrano otticamente in modo naturale con la sostanza dentale residua. In seguito alla fresatura, il restauro viene lucidato e cementato adesivamente.

Indicazioni cliniche: faccette; intarsi; onlay (ad esempio faccette occlusali, corone parziali); corone nella regione anteriore e posteriore. Stabile anche con spessori minimi, possibili restauri con margini sottili senza scheggiature.

Disponibile per i seguenti sistemi CAD / CAM: Programill (Ivoclar Digital), CEREC / inLab (Dentsply-Sirona). I blocchetti Tetric CAD sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MT ed HT e rispettivamente in 5 e 4 colori e nelle grandezze I12 e C14.

STARTER KIT a richiesta 00122774

conf. 2 Tetric CAD HT I12 A1 + 2 Tetric CAD HT I12 A2 + 2 Tetric CAD HT I12 A3 + 1 Tetric CAD MT C14 A1 + 1 Tetric CAD MT C14 A2 + 1 Tetric CAD MT C14 A3 + 1 Variolink Esthetic DC neutral 2.5g + 1 Adhese Universal VivaPen 0.5ml + 1 Optrapol Testpack + accessori

I12 HT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **116,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
-	00122756	00122757	00122758	00122759

C14 HT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **116,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
-	00122765	00122766	00122767	00122768

I12 MT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **116,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
00122764	00122760	00122761	00122762	00122763

C14 MT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **116,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
00122773	00122769	00122770	00122771	00122772

Nacera Hybrid Nacera

Composito ibrido polimero/ceramica, che offre una durezza Vickers che più si avvicina alla dentina naturale. Ideale per corone parziali, corone singole e strutture per ponti nei settori anteriori e posteriori, ridotte o totalmente anatomiche, fino a 16 elementi con al massimo un elemento intermedio. Disponibili in blocchetto o disco.

BLOCK 18 x 14.7 x 14.7 mm conf. 5 pz euro **128,00**

A1	A2	A3	B1
00120960	00120961	00120962	00120963
C2	D2	BL2	BL3
00120964	00120965	00120966	00123118

BLOCK 15.5 x 38.8 x 18.9 mm conf. 5 pz euro **204,00**

A1	A2	A3	B1
00120939	00120940	00120941	00120942
C2	D2	BL2	BL3
00120943	00120944	00120945	00123117



VITA CAD-Temp IS Vita

blocchetti in composito con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti. Ideali per la realizzazione di corone-abutment, di riabilitazioni provvisorie, e gestione dei tessuti molli. VITA CAD-Temp IS-16 (variante AC) con interfaccia S o L, disponibili in tre colori: 1M2T, 2M2T, 3M2T. Misure IS-16: 18 x 16 x 18 (per corone-abutment).



Vita CAD-Temp IS Vita

VITA CAD-TEMP IS			euro	codice
IS-16 S	1M2T	conf. 5 pz	172,80	00104001
IS-16 S	2M2T	conf. 5 pz	172,80	00104003
IS-16 S	3M2T	conf. 5 pz	172,80	00104005
IS-16 L	1M2T	conf. 5 pz	172,80	00104002
IS-16 L	2M2T	conf. 5 pz	172,80	00104004
IS-16 L	3M2T	conf. 5 pz	172,80	00104006

VITA CAD-Temp monoColor for Cerec/inLab Vita

L'affermato materiale CAD/CAM VITA CAD-Temp monoColor è costituito da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle. Serve per la realizzazione di provvisori di riabilitazione monocromatici. VITA CAD-Temp è stato sviluppato sulla base dell'affermato materiale usato per i denti VITA. All'occorrenza può essere individualizzato con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC.

Vantaggi: elevata stabilità nel lungo periodo; risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC. Con CAD-Temp (CT-55) si possono realizzare ponti provvisori fino a 7 elementi. Compatibili con sistema CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona. Per la geometria CT-55 occorre il sistema inLab/CEREC MC XL.

VITA CAD-TEMP MONOCOLOR CEREC/INLAB			euro	codice
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	0M1T	conf. 2 pz	55,90	00080095
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	0M1T	conf. 10 pz	236,50	00079940
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	1M2T	conf. 2 pz	55,90	00080096
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	1M2T	conf. 10 pz	236,50	00079938
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	2M2T	conf. 2 pz	55,90	00080097
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	2M2T	conf. 10 pz	236,50	00079937
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	3M2T	conf. 2 pz	55,90	00091085
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	3M2T	conf. 10 pz	236,50	00079936
CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm)	1M2T	conf. 1 pz	43,50	00090916
CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm)	2M2T	conf. 1 pz	43,50	00085350
CT-55 (15.5 x 19 x 55 mm)	3M2T	conf. 1 pz	43,50	00079366

VITA CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab Vita

Blocchetti in composito multistrato per la realizzazione di provvisori di riabilitazione, i blocchetti multiColor hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità. CAD-Temp multiColor assicura risultati estetici molto naturali soprattutto nel caso di provvisori di riabilitazione frontali. Elevata stabilità nel lungo periodo. Risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC. Indicato per corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.

Compatibili con Sistemi CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona.

VITA CAD-TEMP MULTICOLOR CEREC/INLAB			euro	codice
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	1M2T	conf. 2 pz	69,30	00098059
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	1M2T	conf. 10 pz	317,60	00079941
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	2M2T	conf. 2 pz	69,30	00091759
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	2M2T	conf. 10 pz	317,60	00079942
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	3M2T	conf. 2 pz	69,30	00091086
CT-40 (15.5 x 19 x 39 mm)	3M2T	conf. 10 pz	317,60	00079582



Vita CAD-Temp monoColor for Cerec / inLab



Vita CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab

Blocs in Zirconio

Copran® Zr | Copran® Zr Precoloured Whitepeaks

Zirconio classico con la massima resistenza alla flessione per ponti fino a 14 elementi intermedi

- Con supporto adatto e codice a barre stampato
- Garanzia a vita
- Disponibile in bianco o precolore nei colori dentina A1, A2, A3



COPRAN Zr	euro
Sirona system block 20/19 bianco; 10pz.	106,40
Sirona system block 40/19 bianco; 10pz.	197,60
Sirona system block 55 (MC-XL) bianco; 2pz.	77,90
Sirona system block 65/25 (MC-XL) bianco; 1pz.	70,30
Sirona system block 85/40 (MC-XL) bianco; 10pz.	148,20
Sirona system block 40/15 A1, A2, A2; 10pz.	209,00
Sirona system block 40/19 A1, A2, A2; 10pz.	217,55
Sirona system block 55 A1, A2, A2; 10pz.	217,55

CopraSupreme | CopraSupreme Precoloured Whitepeaks

Il nuovo zirconio HT con maggiore traslucenza e alta resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa).



COPRA SUPREME Zr	euro
Sirona system block 40/19 bianco; 10pz.	205,20
Sirona system block 55 (MC-XL) bianco; 2pz.	85,50
Sirona system block 65/25 (MC-XL) bianco; 1pz.	77,90
Sirona system block 40/19 A2, A3, B2; 10pz.	205,20
Sirona system block 55 (MC-XL) A2, A3, B2; 2pz.	106,40

CopraSupreme Symphony Whitepeaks

7 strati (4 strati più 3 strati di transizione), zirconio traslucido con maggiore traslucenza e alta resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per cappette e restauri completamente anatomici per un massimo di 14 unità. Nel processo di produzione, 4 strati di zirconio pre-colorato sono sovrapposti uno sull'altro, costruendo 3 strati di transizione nel processo. Il risultato è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci.



COPRA SUPREME SYMPHONY Zr	euro
Sirona system block 40/19 A2, A3, B2; 10pz.	265,05
Sirona system block 55 (MC-XL) A2, A3, B2; 2pz.	144,40

CopraSmile | CopraSmile Precoloured Whitepeaks

Zircone stampato a blocchi con la massima traslucenza per restauri anteriori o posteriori con un massimo di 3 unità. Resistenza alla flessione di circa 600 Mpa



COPRA SMILE Zr	euro
Sirona system block 40/19 A2, A3, B2; 10pz.	244,15
Sirona system block 55 (MC-XL) A2, A3, B2; 2pz.	125,40

CopraSmile Symphony Whitepeaks

Zirconio a 7 strati (4 strati più 3 strati di transizione) con la massima traslucenza per restauri anteriori o posteriori con un massimo di 3 unità. Nel processo di produzione, 4 strati di zirconio pre-colorato sono sovrapposti uno sull'altro, costruendo 3 strati di transizione nel processo. Il risultato è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci. Resistenza alla flessione di circa 600 Mpa.

COPRA SMILE SYMPHONY Zr	euro
Sirona system block 40/19 A2, A3, B2; 10pz.	284,05
Sirona system block 55 (MC-XL) A2, A3, B2; 2pz.	163,40

IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar Vivadent

Blocchetti in ossido di zirconio monocromatici, precolorati. Per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a tre elementi. Elevata resistenza (1.200 MPa, resistenza biassiale media) ed elevata tenacia alla rottura. Questo consente di ridurre notevolmente gli spessori delle pareti dei restauri (corone posteriori 0,6 mm, corone anteriori 0,4 mm). In tal modo è possibile una preparazione mininvasiva che rispetta i tessuti duri ed anche una cementazione convenzionale. Altri colori seguiranno prossimamente (BL, B2, C2, D2). Per la glasura è utilizzabile IPS e.max Crystall./Glaze Paste con o senza effetto di fluorescenza. I blocchetti sono fresabili nelle apparecchiature CEREC/InLab e sinterizzabili nei forni Programat CS4, Programat S1600, SpeedFire (Dentsply/Sirona).

STARTER KIT

a richiesta 00117368

conf. 3 x 2 pz C17 (A1, A2, A3) + 1 x 1 pz B45 A2 + 1 x e.max Crystal Glaze Paste Fluo + 1 x 5 gr Ivoclean + 1 x 9 gr Speedcem + 1 pz Optragate small + 1 pz Optragate Regular + ips DIE material scala colori + accessori vari

C17 LT confezione 5 blocchetti

euro **107,50**

BL	A1	A2	A3
00121025	00117369	00117370	00117371
B1	B2	C2	D2
00117372	00121026	00121027	00121028

B45 LT confezione 3 blocchetti

euro **118,00**

BL	A1	A2	A3
00121029	00117373	00117374	00117375
B1	B2	C2	D2
00117376	00121030	00121031	00121032

VITA YZ Vita

Blocchetti disponibili in biossido di zirconio T (=Translucent) e HT (= High Translucent); grazie alla loro resistenza ottimale (ca. 1.200 MPa) i VITA YZ T (Translucent), consentono strutture sottili per riabilitazioni coronali e a ponte di alta precisione. E i VITA YZ HT (High Translucent), invece, permettono riabilitazioni a ponte monolitiche, ad alta resistenza sia per il settore frontale che posteriore e riabilitazioni in situazioni di spazio limitato. VITA YZ T disponibili nelle misure: 20/19, 40/19, 55, 65/25 e nei colori YZ T White: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente; e come YZ TColor*: precromatizzato solo nel colore LL1/light.

VITA YZ HT disponibili nelle misure: 20/19, 40/19, 55/19, 65/25 e solo come YZ HT White: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare individualmente.

VITA YZ				euro	codice
YZ-20/19	T	WHITE	conf. 4 pz	80,50	00104040
YZ-40/19	T	WHITE	conf. 2 pz	75,90	00104041
YZ-55	T	WHITE	conf. 2 pz	142,80	00104042
YZ-65/25	T	WHITE	conf. 1 pz	112,10	00104043
YZ-20/19	T	COLOR	conf. 4 pz	86,00	00104044
YZ-40/19	T	COLOR	conf. 2 pz	81,20	00104045
YZ-55	T	COLOR	conf. 2 pz	153,00	00104046
YZ-65/25	T	COLOR	conf. 1 pz	120,00	00104047
YZ-20/19	HT	WHITE	conf. 4 pz	80,50	00104048
YZ-40/19	HT	WHITE	conf. 2 pz	75,90	00104049
YZ-55	HT	WHITE	conf. 2 pz	142,80	00104050
YZ-65/25	HT	WHITE	conf. 1 pz	112,10	00104051



IPS e.max ZirCAD Ivoclar Vivadent

Blocchetti in ossido di zirconio stabilizzati con ittrio presinterizzati per la tecnologia CAD/CAM. Sviluppati per il processo di fresatura con il sistema InLab (Sirona), deve avvenire con un ingrandimento di circa il 20%. Dopo la sinterizzazione il materiale si trasforma in una ceramica a base di ossidi a policristalli di zirconio di fase tetragonale. Il materiale con oltre 900Mpa di resistenza alla flessione è in grado di soddisfare i requisiti clinici dovuti al carico masticatorio soprattutto nei settori latero-posteriori.

C13 confezione 5 blocchetti **euro 64,05**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00075969	00075970	00075971

C15 confezione 5 blocchetti **euro 86,40**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00051851	00075944	00075945

C15L confezione 5 blocchetti **euro 98,70**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00066951	00073771	00074957

B40 confezione 3 blocchetti **euro 100,50**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00051850	00073772	00075951

B40L confezione 3 blocchetti **euro 110,00**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
00075979	00057318	00075954	00075955

B40L confezione 9 blocchetti **euro 314,50**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00075956	00075957	00075958

B55 confezione 1 blocchetto **euro 70,25**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00072173	00075959	00075960

B65 confezione 1 blocchetto **euro 110,00**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00072175	00075963	00075964

B65L confezione 1 blocchetto **euro 177,50**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00099245	00099246	00099247

B85L confezione 1 blocchetto **euro 234,00**

Probe Blocks	MO 0	MO 1	MO 2
-	00095492	00081100	00096606



CAD-CAM G-14

Blocchetti IPS e.max ZirCad

abbreviazioni	articolo	larghezza	lunghezza	altezza
Crown	C 13	13,2	13,2	14,0
Crown	C 15	14,5	15,5	18,5
Crown	C 15 L	15,4	19,0	20,0
Bridge	B 40	14,2	15,5	40,0
Bridge	B 40 L	15,4	19,0	39,0
Bridge	B 55	15,5	19,0	55,0
Bridge	B 65	22,0	25,0	65,0
Bridge	B 65 L-17	17,0	40,0	65,0
Bridge	B 85 L-22	22,0	40,0	85,0

Zirconia Zyttria® Concept

Blocchetti Sistema Sirona* Concept

ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT
PARALLELEPIPEDO CON PERNO

misura	40 x 15	40 x 19
altezza	14	15.5
codice	00094913	00092330
prezzo	240,00	260,10
conf.	12 pz	12 pz

PARALLELEPIPEDO CON PERNO MC XL

misura	55 x 19	65 x 25	65 x 40	85 x 40
altezza	15.5	22	22	22
codice	00092333	00092337	00092338	00092339
prezzo	220,00	220,00	128,40	305,10
conf.	6 pz	4 pz	2 pz	2 pz

Blocchetti Sistema Sirona* Concept

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS (sint. 1450°C)
PARALLELEPIPEDO CON PERNO MC XL

misura	60 x 25	65 x 40
altezza	22	22
codice	00104235	00096737
prezzo	279,20	146,70
conf.	5 pz	2 pz

ZYTTRIA Z COLOR EXTRA PLUS Precolorato ad alta traslucenza
PARALLELEPIPEDO CON PERNO

	euro	codice
60 x 25 altezza 22 colore 20/MEDIUM conf. 12pz.	300,10	00104239

Blocchetti Sistema ZirkonZahn* Concept (Pantografo manuale)

ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT
PARALLELEPIPEDO SISTEMA ZIRKONZAHN

misura	43 x 20	43 x 20	62 x 25	75 x 36	75 x 36
altezza	Z3 h16	Z3 ALTO h20	Z7 h20	Z9 h16	Z9 ALTO h22
codice	00092367**	00092368**	00092369	00092370	00092372
prezzo	310,10	350,10	208,40	240,00	290,10
conf.	12 pz	12 pz	5 pz	4 pz	4 pz

** da utilizzare con adattatore Concept

PIASTRA SISTEMA ZIRKONZAHN

altezza	Z16 h16	Z16 ALTO h22
codice	00092373	00094956
prezzo	133,40	170,00
conf.	1 pz	1 pz

CAD-CAM G-15



Zirconia Zyttria® Concept

Blocchetti Sistema ZirkonZahn* Concept (Pantografo manuale)

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT (sint. 1530°C)

PARALLELEPIEDO SISTEMA ZIRKONZAHN

misura	43 x 20	43 x 20	62 x 25	75 x 36	75 x 36
altezza	Z3 h16	Z3 ALTO h20	Z7 h22	Z9 h16	Z9 ALTO h22
codice	00092374**	00092375**	00092376	00092377	00092378
prezzo	360,10	400,10	275,10	280,10	333,40
conf.	12 pz	12 pz	5 pz	4 pz	4 pz

** da utilizzare con adattatore Concept

PIASTRA SISTEMA ZIRKONZAHN

altezza	Z1 h16	Z1 ALTO h22
codice	00094987	00094988
prezzo	146,70	183,40
conf.	1 pz	1 pz

Blocs in Ceramica



IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio per la tecnologia CAD/CAM. Dopo il processo di cristallizzazione a 850°C la resistenza finale è di 360Mpa, il materiale è quindi indicato per ricostruzioni sui settori anteriori e premolari e va rivestito con e.max Ceram. Valori CET ((100°-400°C) 10.2 (x10⁻⁶ K-1). I blocchetti IPS e.max CAD sono disponibili in tre gradazioni di traslucenza e due grandezze. I blocchetti per la lavorazione interamente anatomica sono disponibili in 16 colori A-D e 4 colori Bleach BL, per la tecnica di stratificazione nei colori MO 0-MO 4.

IPS e.max CAD for inLab COLORAZIONE A-D

euro **codice**

BASIC KIT

a richiesta 00076035

conf. 1 IPS e.max CAD for CEREC/inLab 5p MO 1, C14

2 IPS e.max CAD CEREC/inLab 5p HT (A1,A2) C14 2 IPS e.max CAD CEREC/inLab 5p.LT (A1, A2) C14

4 IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 g, (1,2,I1,I2)

4 IPS e.max CAD Cryst./Stains 1g (white, sunset, khaki, mahog.)

1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste 3 g 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 270 ml

1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 15 ml 1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal 5g

1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid 15 ml pennelli di modellazione

1 IPS Contrast Spray labside 200 ml 1 IPS e.max CAD Crystallization Tray

1 IPS Object Fix Flow 10 ml 1 IPS Object Fix Putty 10 g

1 IPS Ceramic Etching Gel Kit OptraStick Test Pack

1 IPS e.max CAD MO campionario masse 1 IPS e.max Press / CAD LT Shade Guide

1 IPS e.max Press / CAD HT Shade Guide 1 box per materiale small (1x55/1x80)

IPS e.max CAD Monolithic Solutions Ivoclar Vivadent

Le tre diverse gradazioni di traslucenza MO HT LT, consentono la realizzazione di restauri estetici; caratteristiche individuali dei pazienti possono essere completate con la tecnica di pittura o con la tecnica cutback. La scelta comprende un ampio spettro di indicazioni, dalle faccette sottili fino ai ponti di tre elementi; a completamento della linea blocchetti IPS e.max CAD sono ora disponibili due nuove grandezze per l'impiego monolitico: il blocchetto C 16 è indicato per restauri di denti singoli di grandi dimensioni, il blocchetto B 32 è indicato per ponti di 3 elementi. Indicazioni: faccette sottili (0,4 mm) - faccette - faccette occlusali - inlays/onlays - corone - corone con grande estensione verticale - ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale).

confezione 5 blocchetti

euro **116,50**

Colori		MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4
C14	codice articolo	00066943	00071031	00058877	00066944	00066945

confezione 5 blocchetti

euro **116,50**

Colori	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
I12	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	0075161	0075164	0075166	0075167	0075980	0075169	0075981	0075982	0075983	0075984	0075985	0075986	0075987	0075988	0075989	0075990
I12	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	0066871	0066872	0066873	0066874	0076018	0066875	0066876	0066877	0076019	0076020	0066878	0076021	0076022	0076023	0066879	0076025
C14	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	0075160	0075162	0075165	0075991	0075992	0075168	0076002	0076003	0076004	0076005	0076006	0076007	0076008	0076009	0076010	0076012
C14	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	0066880	0066881	0066882	0066883	0076026	0066884	0066885	0066886	0076027	0076037	0066887	0076038	0076039	0076040	0066888	0076041

confezione 5 blocchetti

euro **158,00**

Colori	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2
C16	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00099171	00099172	00099173	00099174	00099175	00099176	00099177	00099178	00099179

confezione 3 blocchetti

euro **206,50**

Colori	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2
B32	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00099193	00096332	00096331	00097609	00099194	00099195	00099196	00099197	00099198

IPS e.max CAD Abutment Solutions Ivoclar Vivadent

Trattamenti ibridi individuali realizzati al CAD/CAM per impianti, per trattamenti di denti singoli nei settori anteriori e latero-posteriori. Questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio (LS2) ed incollati con una base in titanio. I blocchetti A 14 e A 16 presentano un'interfaccia predisposta, p.es. per i Ti-Base Sirona. I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per corone abutment ibride ed in vari colori. L'eccellente resistenza del legame fra vetroceramica al disilicato di litio (LS2) e la Ti-Base si ottiene con il cemento composito specificatamente sviluppato Multilink Hybrid Abutment. Indicazioni: abutment ibridi nei settori anteriori e lateroposteriori per restauri di denti singoli - corone abutment ibride nei settori anteriori e lateroposteriori



confezione 5 blocchetti						euro	194,50
Colori		MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4	
A14 (S)	codice articolo	00099163	00099253	00099255	00099164	00099165	
A14 (L)	codice articolo	00099166	00098898	00098100	00099169	00099170	

confezione 5 blocchetti euro 235,00

Colori	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2	BL2
A16 (S)	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00099180	00099181	00096636	00099182	00099183	00099184	00099185	00099186	00099187	00099200
A16 (L)	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00097048	00096329	00096330	00098897	00099188	00099189	00099190	00099191	00099192	00099201

IPS e.max CAD Veneering Solutions Ivoclar Vivadent

IPS e.max CAD Veneering Solutions: strutture di rivestimento estetico realizzate con tecnologia CAD/CAM per strutture in ossido di zirconio. La combinazione di materiali, di disilicato di litio (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2) consente la realizzazione di restauri di ponti a supporto dentale ed implantare (CAD-on) con un'eccezionale resistenza globale ed un'attraente estetica. Indicazioni: corone e ponti (di tre e più elementi, soprattutto su impianti). Vantaggi: elevata estetica e resistenza grazie alla combinazione di disilicato di litio (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2); legame ceramico innovativo ed omogeneo; colori dentali calibrati individualmente e la possibilità di successive caratterizzazioni.



confezione 3 blocchetti euro 211,00

Colori	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1	C2	D2
B40	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	00084305	00084306	00084307	00084308	00084309	00084310	00084311	00084312	00084313

confezione 3 blocchetti euro 219,50

B40L	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	00101519	00096545	00096799	00101520	00101521	00101522	00101523	00101524	00101525

struttura ceramica IPS e.max CAD	MO 0				MO 1		MO 2		MO 3	MO 1		MO 3		MO 1		MO 4			MO 3	
corona IPS e.max CAD	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
	BL	BL	BL	BL	A	A	A	A3.	A	B	B	B	B	C1	C2	C3	C4	D	D	D

Blocchetti IPS e.max CAD for CEREC/inLab

abbreviazioni	articolo	larghezza	lunghezza	altezza
Inlay	I12	10,4	12,5	15,0
Crown/Abutment	C14 / A14	12,4	14,5	18,0
Crown/Abutment	C16 / A16	17,8	15,8	18,0
Bridge	B32	14,5	14,5	32,0
Bridge	B40	15,2	15,2	38,0
Bridge 3 and plus elements	B40L	15,4	19,0	39,0

IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent

IPS e.max CAD Impulse Ivoclar Vivadent

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio per la tecnologia CAD/CAM, disponibili in 2 colori Opal (Opal 1,2).

Ips e.max Impulse Opal si utilizzano per restauri di aree smalto con opalescenza decrescente e luminosità crescente da 1 a 2.

IPS e.max CAD IMPULSE for CEREC/inLab			euro	codice
OPAL	O1 C14	conf. 5 pz	128,00	00088849
OPAL	O2 C14	conf. 5 pz	128,00	00088850

IPS e.max CAD CRYSTALLIZATION			euro	codice
CRYSTALLIZATION KIT			a richiesta	00082763
conf. 3 IPS e.max CAD Crystall./Shade 3 gr (1, 2, I1) + 3 IPS e.max CAD Crystall./Stains 1 gr (white, sunset, mahogany) + 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste 3 gr + 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray 270 ml; 1 IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid 15 ml + 1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal 5 gr + 1 IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid 15 ml + 1 IPS e.max CAD Crystallization Tray + 1 IPS Objekt Fix Flow 10 ml + 1; IPS Object Fix Putty 10 gr + IPS e.max Press/CAD LT campionario masse + 1 IPS Natural Die Material scala colori + 1 IPS Ceramic gel mordenzante Kit + 1 Optra Stick Testpack				

IPS e.max CAD CRYSTALL SHADE			euro	codice
conf. da 3 gr			47,85	TABELLA
0	1	2	3	
00066889	00066890	00066891	00066892	
4	I1	I2		
00066893	00066894	00066895		

IPS e.max CAD CRYSTALL STAINS			euro	codice
conf. da 1 gr			23,05	TABELLA
WHITE	CREME	SUNSET	COPPER	
00066896	00066897	00066898	00066899	
OLIVE	KHAKI	MAHOGANY		
00066900	00066901	00066902		

IPS e.max CAD CRYSTALL			euro	codice
CRYSTALL ADD-ON INCISAL	conf. da 5 gr		23,65	00066905
LIQUIDO ALL ROUND	flacone da 15 ml		20,30	00066907
LIQUIDO LONG LIFE	flacone da 15 ml		20,30	00084317
CRYSTALL GLASURA LIQUIDO	flacone da 15 ml		20,30	00066906
CRYSTALL GLASURA PASTA	siringa da 3 gr		47,85	00066903
CRYSTALL GLASURA SPRAY	flacone da 270 ml		79,85	00066904

IPS e.max CAD CRYSTALL			euro	codice
conf. 6.5 gr			74,20	TABELLA
1	2	3	4	5
00084318	00084319	00084320	00084321	00084322
6	7	8	9	
00084324	00084325	00084326	00084327	

IPS e.max CAD CRYSTALL			euro	codice
ADD-ON	DENTINA	conf. 5 gr	23,65	00084315
ADD-ON	CONNECT	conf. 5 gr	23,65	00084316

Nuova pasta glasura IPS e.max CAD Crystall. Glaze Fluo per conferire un effetto di fluorescenza ai restauri realizzati in IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD ed IPS Empress CAD.

CRYSTALL GLAZE PASTE FLUO			euro	codice
siringa da 3 gr			46,90	00117377



e.max CAD Ivoclar Vivadent



IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'ausilio per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrato di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

IPS OBJECT FIX		euro	codice
FLOW	conf. 10 ml	19,30	00065331
PUTTY	conf. 10 gr	19,30	00066966

IVOMIX		euro	codice
100-240V / 50-60 Hz		a richiesta	00084330

Portaoggetti in nitrato di silicio per la cristallizzazione di restauri IPS e.max CAD. I pins sono da utilizzare per i blocchetti LT.

IPS E.MAX CAD CRYSTALLIZATION TRAY		euro	codice
TRAY 1 portaoggetti G e 9 pins (3 per tipo nelle misure S, M, L)		123,50	00066963
PINS	6 pins (2 per tipo nelle misure 2,M, ed L)	76,90	00066964

IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent



HT High Translucency LT Low Translucency

IPS Empress CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetto in vetro ceramica a base di leucite, composto da una base di vetro ed una fase cristallina, particolarmente omogeneo, che diffonde la luce in modo naturale, provvedendo ad un effetto camaleontico equilibrato. Il materiale IPS Empress CAD raggiunge valori di resistenza di 160Mpa. I blocchetti sono disponibili in due gradazioni di traslucenza HT (High Translucency) ed LT (Low Translucency) nella colorazione A-D. Inoltre è disponibile il blocchetto policromatico IPS Empress CAD Multi.

MULTI = Decorso cromatico, traslucenza e fluorescenza simili al dente naturale for Cerec / InLab. Blocchetti policromatici disponibili in cinque colori A-D ed in 3 dimensioni per la realizzazione di restauri altamente estetici. Presentano un decorso cromatico naturale dalla dentina verso lo smalto; nella zona cervicale un croma maggiore a fluorescenza più forte che decresce in direzione del margine incisale più traslucente. Particolarmente indicati per la realizzazione di corone integrali e parziali, e faccette.

HT = maggiore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più basso.

I blocchetti HT, monocromatici, combinano elevata resistenza all'elevata traslucenza. Presentano eccellente effetto camaleontico e fluorescenza simile allo smalto incisale. Le eccellenti caratteristiche estetiche consentono di realizzare restauri mininvasivi come faccette, inlays, onlays. In particolare, proprio i restauri più piccoli, si integrano in modo ideale nella sostanza dentale rimanente. Particolarmente indicati nella tecnica di pittura.

LT = Minore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più alto.

I blocchetti LT, monocromatici, si distinguono per un elevato valore e croma naturale, fluorescenza naturale simile alla dentina in grado di favorire una integrazione perfetta con i denti contigui. Per la loro traslucenza sono particolarmente indicati nella realizzazione di restauri più grandi quali corone integrali e parziali. Il valore calibrato evita "l'ingrignimento" del restauro in corone integrali e parziali. MULTI = Decorso cromatico, traslucenza e fluorescenza simili al dente naturale.

HT HIGH TRASLUCENCY	confezione 5 blocchetti	euro 64,85
LT LOW TRASLUCENCY	confezione 5 blocchetti	euro 64,85
MULTI	confezione 5 blocchetti	euro 83,85

Colori	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C2	D3
I8	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	00069452	00062377	00062376	00069450	00069462	00069451	00069463	00069464	00069465
I10	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	00069448	00067211	00065597	00069449	00069466	00069467	00069468	00069469	00069470
I10	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00070487	00063369	00063370	00072132	00072133	00072134	00072135	00072136	00072137
I12	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
codice	00069453	00069454	00065596	00069455	00069472	00065598	00069473	00069474	00069475
I12	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00063371	00063372	00063373	00072138	00072139	00072140	00072141	00072142	00072143
I12	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI
codice	00069267	00063378	00061946	00061947	00072161				
C14	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT	LT
codice	00063374	00063375	00063376	00063377	00072144	00072145	00072146	00072147	00072148
C14	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI
codice	00072162	00063379	00061948	00061949	00072163				
C14L	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI
codice	00072164	00069268	00069269	00072165	00072166				



Massa per minime correzioni di forma (es. punti di contatto prossimali) di restauri in IPS EMPRESS CAD. Si applica con un pennello sulle zone deterse; cottura nel forno per ceramica.

IPS EMPRESS ADD-ON	euro	codice
flacone da 20 gr	30,05	00035529

Vita Enamic IS

Blocchetti in ceramica ibrida, con un'interfaccia integrata per una base di adesione/ titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti, mesostrutture e/o corone-abutment del colore dei denti e sovrastrutture definitive.

VITA ENAMIC IS sono disponibili nei colori:

- Translucent 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
- High Translucent e in due misure entrambe con interfaccia S o L.
- IS-14: 18 x 14 x 12 (per mesostrutture)
- IS-16 : 18 x 16 x 18 (per corone-abutment)



Vita Enamic IS Vita

VITA ENAMIC IS			euro	codice
IS-14 S	1M1-T	conf. 5 pz	238,45	00104007
IS-14 S	1M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104009
IS-14 S	2M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104011
IS-14 S	3M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104013
IS-14 S	4M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104015
IS-14 L	1M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104008
IS-14 L	1M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104010
IS-14 L	2M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104012
IS-14 L	3M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104014
IS-14 L	4M2-T	conf. 5 pz	238,45	00104016
IS-16 S	1M1-T	conf. 5 pz	291,45	00104017
IS-16 S	1M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104019
IS-16 S	2M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104021
IS-16 S	3M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104023
IS-16 S	4M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104025
IS-16 L	1M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104018
IS-16 L	1M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104020
IS-16 L	2M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104022
IS-16 L	3M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104024
IS-16 L	4M2-T	conf. 5 pz	291,45	00104026

Vita Enamic CAD per Cerec/Inlab Vita

Vita Enamic è la prima ceramica ibrida con struttura a reticolo duale, che assorbe in modo ottimale le forze di masticazione. In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo polimerico ed i due reticoli si compenetrano integralmente. Vita Enamic è pertanto un materiale che riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite. Questo innovativo materiale garantisce per la prima volta oltre ad un'altissima caricabilità anche una straordinaria elasticità. Pertanto è la soluzione di eccellenza per riabilitazioni coronali nel settore posteriore e consente spessori minimi delle pareti coronali per riabilitazioni a minima invasività. Vita Enamic convince inoltre per massima affidabilità, risultati di fresaggio precisi e stabilità degli spigoli per risultati fedeli nel dettaglio. Le eccellenti caratteristiche di Vita Enamic garantiscono una lavorazione rapida dei restauri, con usura ridotta degli utensili di fresaggio. Inoltre la ceramica ibrida non richiede ulteriori trattamenti per raggiungere la resistenza definitiva e può essere incorporata immediatamente dopo il fresaggio.



VITA ENAMIC		euro	codice
STARTER SET	TECHNICAL	a richiesta	00094838
conf. 5 serie da 5 pz			
1 serie 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 EM-14 high translucent/cad.			
4 serie 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 EM-14 translucent/cad. VITA ENAMIC Polishing Set technical			



Vita Enamic CAD

VITA ENAMIC				euro	codice
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)	HT	0M1	conf. 5 pz	117,15	00098371
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)	HT	1M1	conf. 5 pz	117,15	00098372
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)	HT	1M2	conf. 5 pz	117,15	00098373
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)	HT	2M2	conf. 5 pz	117,15	00098374
EM-10 (8 x 10 x 15 mm)	HT	3M2	conf. 5 pz	117,15	00098375
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	HT	1M1	conf. 5 pz	133,55	00094604
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	HT	1M2	conf. 5 pz	133,55	00094605
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	HT	2M2	conf. 5 pz	133,55	00094606
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	HT	3M2	conf. 5 pz	133,55	00094607
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	T	1M1	conf. 5 pz	133,55	00094839
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	T	1M2	conf. 5 pz	133,55	00094840
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	T	2M2	conf. 5 pz	133,55	00094841
EM-14 (12 x 14 x 18 mm)	T	3M2	conf. 5 pz	133,55	00094842

Enamic Multicolor Vita

Blocchetti per CAD/CAM con andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale. Offre giochi di colore naturali grazie all'andamento cromatico integrato nel blocchetto; lavorazione veloce, dato che dopo la lucidatura il restauro è immediatamente inseribile; altissima caricabilità, perché le forze di masticazione vengono assorbite. È un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale.

EMC-14 HT conf. 2 pz			euro 161,00	
1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00117259	00117260	00117261	00117262	00117263

ENAMIC STAINS Vita

per una maggiore naturalezza. Riprodurre sfumature cromatiche naturali in modo rapido e semplice. Il Kit comprende sei supercolori ed accessori per la riproduzione di tonalità cromatiche naturali. La lavorazione si suddivide in 5 fasi: condizionamento della superficie del restauro, miscelazione e applicazione dei supercolori, polimerizzazione intermedia, stesura della glasura chimica e polimerizzazione finale.

VITA ENAMIC STAINS	euro	codice
KIT	a richiesta	00094843
conf. 6 flaconi da 2 gr Vita Enamic Stain (white, corn, brown, khaki, blue e black)		
1 flacone da 20 ml Vita Enamic Stains Liquid		
1 flacone da 20 ml Vita Enamic Glaze		
1 confezione microbrush		
1 flacone da 50 ml Vita VM LC Cleaner		
2 Pennelli n.1		
1 Piastra di miscelazione		
1 Spatola		
Istruzioni d'uso		

VITA ENAMIC STAINS		euro	codice	
1	BIANCO	flacone da 2 gr	35,30	00094844
2	GIALLO	flacone da 2 gr	35,30	00094846
3	MARRONE	flacone da 2 gr	35,30	00094847
4	CACHI	flacone da 2 gr	35,30	00094848
5	AZZURRO	flacone da 2 gr	35,30	00094849
6	NERO	flacone da 2 gr	35,30	00094850
LIQUIDO		flacone da 20 ml	67,30	00094851



VITA ENAMIC GLAZE	euro	codice
LIQUIDO flacone da 20 ml + 20 microapplicatori	109,60	00094852

VITA ENAMIC LC CLEANER	euro	codice
LIQUIDO flacone da 50 ml	7,90	00097941

VITA ENAMIC POLISHING	euro	codice
SET TECHNICAL conf. assortita da 8 pz	95,50	00097483
<i>Gommini: 2 ruota (R15m / R15f) + 2 fiamma (S5m / S5f) + 2 lenticolare (L16m / L16f) + 2 Torpedo (T6m / T6f)</i>		

Vita Suprinity PC Vita

VITA SUPRINITY definisce nuovi criteri per la nuova generazione di ceramiche al silicato di litio rinforzate con biossido di zirconio (ZLS). Ha una struttura a granulometria fine e omogenea che assicura eccellenti qualità merceologiche, quindi caricabilità elevata e costante e particolare affidabilità. Con un'ampia gamma di indicazioni: da corone frontali e posteriori a sovrastrutture su impianti fino a faccette, inlays e onlays, la nuova ceramica CAD/CAM ha molteplici impieghi.

Per l'eccellente trasparenza, fluorescenza e opalescenza integrate, VITA SUPRINITY assicura un'ottima estetica e giochi cromatici naturali. Con i colori di caratterizzazione VITA AKZENT e la ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 11, a basso punto di fusione e appositamente sviluppata si possono realizzare risultati altamente estetici.

Il materiale presenta caratteristiche di lavorazione ottimali, come ad esempio semplicità di fresaggio e lucidatura. Dopo il fresaggio con il sistema Sirona MC XL VITA SUPRINITY presenta un'ottima stabilità degli spigoli. Anche i risultati altamente precisi sono riconducibili alla fine granulometria strutturale della nuova vetroceramica.

È disponibile nei colori 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 e D2. Per tutti i colori vi sono inoltre due livelli di trasparenza (T= Translucent, HT= High Translucent).

VITA SUPRINITY	euro	codice
STARTER SET TECHNICAL	a richiesta	00098284
<i>8 conf. da 5 pz High Translucent (0M1-HT, A1-HT, A2-HT, A3-HT, A3.5-HT, B2-HT, C2-HT, D2-HT)</i>		
<i>8 conf. da 5 pz Translucent (0M1-T, A1-T, A2-T, A3-T, A3.5-T, B2-T, C2-T, D2-T)</i>		
<i>1 conf. VITA AKZENT Plus GLAZE LT SPRAY</i>		
<i>1 Supporto di cottura a nido d'ape</i>		
<i>1 confezione Perni di platino, 2 pz.</i>		
<i>1 conf. VITA SUPRINITY Polishing Set (clinical / technical) Istruzioni di impiego</i>		



VITA SUPRINITY High Translucent		euro	codice
18 x 14 x 12 mm conf. da 5 pz		113,05	TABELLA
0M1-HT	A1-HT	A2-HT	A3-HT
00098285	00098286	00098287	00098288
A3.5-HT	B2-HT	C2-HT	D2-HT
00098289	00098290	00098291	00098292

VITA SUPRINITY Translucent		euro	codice
18 x 14 x 12 mm	conf. da 5 pz	113,05	TABELLA
0M1-T	A1-T	A2-T	A3-T
00098293	00098294	00098295	00098296
A3.5-T	B2-T	C2-T	D2-T
00098297	00098298	00098299	00098300

Sviluppati per la finitura di superfici di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

VITA SUPRINITY POLISHING SET	euro	codice
TECHNICAL conf. assortita da 6 pz	173,95	00098304
<i>Gommini: 2 ruota (R15m / R15f) + 2 fiamma (S5m / S5f) + 2 lenticolare (L16m / L16f) + 2 Longpin (LPm / LPf)</i>		



Vita Suprinity

Vitablocs Triluxe forte Vita

Blocchetti in ceramica feldspatica a struttura microfine con quattro strati di differente intensità cromatica. Il passaggio cromatico da smalto a colletto è ancora più sfumato, e nella zona della dentina e del colletto il croma è più accentuato. In combinazione con la crescente fluorescenza in direzione cervicale si ha garanzia di un effetto naturale anche in presenza di strati sottili.

Vantaggi: Estetica più avanzata, nei VITABLOCS TriLuxe forte la transizione cromatica dalla zona cervicale a quella incisale è ancora più sfumata. Economicità: riabilitazione razionali ed estetiche grazie all'andamento cromatico integrato. Generalmente non occorrono caratterizzazioni o individualizzazioni. Indicazioni: Faccette, corone parziali e complete per i settori frontale e posteriore

Colori: Disponibili in 3 colori 3D-MASTER: 1M2C, 2M2C, 3M2C; e in 4 colori Vita Classical A1, A2, A3, A3.5.

Compatibili con sistemi CEREC-/CEREC MC XL e inLab/inLab MC XL Sirona, Kavo e Amman Girrbach. Restauri in VITABLOCS possono essere caratterizzati con gli appositi supercolori VITA Akzent Plus, possono essere individualizzati con la ceramica per rivestimento estetico VITA VM9. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto- e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar Vivadent) e RelyX Unicem (3M ESPE). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.



VITABLOCS Triluxe forte Vita

VITABLOCS TRILUXE FORTE					euro	codice
TF-12	(10 x 12 x 15 mm)	1M2C	conf. 5 pz		90,70	00097954
TF-12	(10 x 12 x 15 mm)	2M2C	conf. 5 pz		90,70	00098508
TF-12	(10 x 12 x 15 mm)	3M2C	conf. 5 pz		90,70	00098509
TF-14	(12 x 14 x 18 mm)	1M2C	conf. 5 pz		103,05	00081415
TF-14	(12 x 14 x 18 mm)	2M2C	conf. 5 pz		103,05	00097093
TF-14	(12 x 14 x 18 mm)	3M2C	conf. 5 pz		103,05	00084679
TF-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	1M2C	conf. 5 pz		117,70	00097955
TF-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	2M2C	conf. 5 pz		117,70	00097095
TF-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	3M2C	conf. 5 pz		117,70	00097096
TF-40/19	(15.5 x 19 x 39 mm)	1M2C	conf. 2 pz		78,30	00097961
TF-40/19	(15.5 x 19 x 39 mm)	2M2C	conf. 2 pz		78,30	00096241
TF-40/19	(15.5 x 19 x 39 mm)	3M2C	conf. 2 pz		78,30	00097962

VITABLOCS TRILUXE FORTE CLASSICAL					euro	codice
TF-12	(10 x 12 x 15 mm)	A3.5C	conf. 5 pz		90,70	00104032
TF-14	(12 x 14 x 18 mm)	A3.5C	conf. 5 pz		103,05	00104033
TF-14/14	(12 x 14 x 18 mm)	A1C	conf. 5 pz		117,70	00104034
TF-14/14	(12 x 14 x 18 mm)	A2C	conf. 5 pz		117,70	00104035
TF-14/14	(12 x 14 x 18 mm)	A3C	conf. 5 pz		117,70	00104036
TF-14/14	(12 x 14 x 18 mm)	A3.5C	conf. 5 pz		117,70	00104037

Vitablocs RealLife Vita

Gli innovativi VITABLOCS RealLife sono stati sviluppati specialmente per riabilitazioni frontali altamente estetiche: la struttura tridimensionale dei blocchetti con un nucleo di dentina circondato da un mantello di smalto riproduce la naturale curvatura dell'andamento cromatico tra dentina e smalto. In funzione delle sfumature naturali della sostanza dentaria residua restauri in VITABLOCS RealLife possono avere una quantità maggiore di zona cervicale o incisale. Vantaggi: Estetica dei frontali estremamente naturale, semplice riproduzione di sfumature cromatiche fini e naturali, dato che la struttura tridimensionale dei blocchetti riproduce quella del dente naturale. L'intelligente combinazione di blocchetti e software consente di realizzare rapidamente riabilitazione altamente estetiche senza necessità di caratterizzazioni o individualizzazioni. Massima libertà di configurazione di riabilitazioni perfettamente individualizzate grazie alla possibilità di posizionamento tridimensionale del restauro nel blocchetto.





VITABLOCS RealLife Vita

Indicazioni: VITABLOCS RealLife sono particolarmente indicati per corone frontali e faccette altamente estetiche. Sono disponibili nei 6 colori 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C e 3M2C. Per il fresaggio della ceramica VITABLOCS RealLife occorrono i sistemi CEREC MC XL o inLab MC XL Sirona, kavo e Amman Girrbach. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar) e RelyX Unicem (3M). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.

VITABLOCS REALLIFE				euro	codice
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	0M1C	conf. 5 pz	126,15	00097964
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	1M1C	conf. 5 pz	126,15	00097965
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	1M2C	conf. 5 pz	126,15	00082223
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	2M1C	conf. 5 pz	126,15	00097966
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	3M2C	conf. 5 pz	126,15	00082225
RL-14/14	(14 x 14 x 18 mm)	4M2C	conf. 5 pz	126,15	00082227



Lava Ultimate CAD/CAM Restorative for CEREC 3M Espe

Blocchetti in resina nanoceramica per il fresaggio con il sistema Cerec Chairside e Cerec InLab. Indicazioni: corone, corone su impianti, inlay, onlay e faccette.

LAVA ULTIMATE FOR CEREC		euro	codice
TRIAL KIT		89,00	00087598
conf. 5 blocchetti (1 x I12 A2-LT, 1 x I12 A3-HT, 1 x 14L A2-LT, 1 x 14L A3-LT, 1 x 14L A3,5-LT)			
conf. 5 blocchetti		111,50	TABELLA

	I12 / HT	I12 / LT	14L / HT	14L / LT
A1	00087613	00087614	00087600	00087601
A2	00087615	00087616	00087602	00087603
A3	00087617	00087618	00087604	00087605
A3.5		00087619		00087607
B1	00087620	00087621	00087608	00087609
C2		00087622		00087610
D2		00087623		00087611
BLEACH		00087612		00087599



Lava Ultimate CAD/CAM Restorative for Cerec 3M Espe

Initial LRF GC

Blocco feldspatico rinforzato con leucite per CAD/CAM disponibile in cinque colori Vita ad alta e a bassa traslucenza per restauri indiretti di forma anatomica completa in ceramica integrale. GC Initial LRF garantisce la massima resistenza alla frattura e la più alta resistenza alla flessione nella sua categoria, sia nel caso in cui i restauri vengano semplicemente lucidati che nel caso in cui vengano glasati.

Elevata densità, superfici estremamente lisce dopo la fresatura, facile lucidatura con gli strumenti manuali e meccanici convenzionali.

- Effetto mimetico per un'integrazione cromatica ottimale.
- Speciale pasta per glasura (Glaze Paste) per la cottura della ceramica.

Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **euro 70,00** **codice**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116847	00116848	00116849	00116850	00116851

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz euro **70,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116852	00116853	00116854	00116855	00116856

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz euro **70,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116857	00116858	00116859	00116860	00116881

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **euro 70,00** **codice**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116861	00116862	00116863	00116864	00116865

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz **70,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116866	00116867	00116868	00116869	00116870

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz **70,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00116871	00116872	00116873	00116874	00116875

Grezzi BLEACH for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz **euro 70,00** **codice**

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz **70,00** **00116877**

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz **70,00** **00116878**

INITIAL LRF GLAZE

PASTE & LIQUID **euro 43,95** **codice 00116879**



CAD-CAM G-27

CeraSmart GC

Ceramica ibrida ad assorbimento di forze in blocco per CAD/CAM per macchine fresatrici CEREC®. CERASMART vi sorprenderà con i seguenti vantaggi:

- Massima resistenza alla flessione nella categoria di prodotti
- Elevata flessibilità per ammortizzare la pressione masticatoria
- Fresaggio rapido e preciso, adattamento dei margini perfetto
- Filler ultra-fini dispersi uniformemente per una lucidatura durevole e minor usura sui denti opposti
- Elevata radiopacità per un facile follow-up

Estetica e CAD/CAM si uniscono ottenendo una fluorescenza e opalescenza bilanciate; una lucidità superficiale elevata e facile da ottenere; e particolarmente indicati nelle ricostruzioni su impianti. La caratterizzazione è molto semplice con l'innovativo prodotto per glasura colorante resistente all'usura Optiglaze Color. I blocchi di Cerasmart sono compatibili con CEREC e sono elencati già dall'aggiornamento software 4.2.4.





Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz euro **113,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103902	00103903	00103904	00103905	00103906

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz euro **123,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103920	00103921	00103922	00103923	00103924

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz euro **133,95**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103931	00103932	00103933	00103934	00103935

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz euro **113,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103907	00103908	00103909	00103911	00103912

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz euro **123,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103925	00103926	00103927	00103928	00103929

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz euro **133,95**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00103936	00103937	00103938	00103939	00103940

Grezzi BLEACH for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 1 pz euro **113,10** 00103913

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 1 pz euro **123,50** 00103930

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 1 pz euro **133,95** 00103943

Grezzi HT (High Translucency) attacco Universal

12 (15 x 12 x 10 mm) conf. 5 pz euro **111,20**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00108378	00108379	00108380	00108381	00108382

14 (18 x 14 x 12 mm) conf. 5 pz euro **121,40**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00108389	00108390	00108391	00108392	00108393

14L (18 x 14 x 14 mm) conf. 5 pz euro **131,60**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00108401	00108402	00108403	00108404	00108405

Blocchi in Metallo

CopraSintec Evo K Whitepeaks

Prima mondiale: blocco di polvere pressata Co / Cr, strutture più delicate e spessori minimi delle pareti. Non contiene più leganti, quindi il tempo di sinterizzazione è notevolmente ridotto, con un conseguente minore consumo di gas argon.

Lega di metallo non prezioso tipo 4, quindi nessuna limitazione rispetto alle leghe Co / Cr fresate o colate

Alto rendimento da due a grandi superfici con piccolo restringimento - fino a 40 unità in un blocco

Solo il restringimento dell'8,5% grazie all'esclusivo processo di produzione isostatico ad alta pressione con omogeneità ottimale - nessuna distorsione durante la sinterizzazione

COPRASINTEC EVO K euro

Sirona System block 65/40 **125,40**

Sirona System block 85/40 **214,70**

Dischi in Zirconio

Katana Zirconia ML Kuraray Noritake

I dischi KATANA Zirconia Multi-Layered sono i primi dischi policromatici in zirconia ad alta prestazione al mondo, prodotti su scala industriale e con una qualità eccezionale e costante. Il disco policromatico KATANA™ Zirconia ML Disc consiste in strati di zirconia precolorati che, dopo sinterizzazione, mostrano una variazione continua di colore da dentina a smalto. I dischi possono essere facilmente utilizzati nei laboratori odontotecnici in normali macchine da fresaggio.

Corone e ponti in zirconia altamente estetici possono così essere ottenuti in un unico e veloce passaggio. Le procedure di colorazione, per immersione o con altra tecnica, non sono infatti più necessarie in quanto il disco è precolorato in fase di produzione industriale. Questa esclusiva caratteristica di KATANA™ Zirconia ML Disc comporta non solo un abbattimento dei costi di produzione, ma assicura una costanza di qualità del restauro nel tempo.

KATANA ML

DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

spessore	A DARK	A LIGHT	A WHITE	prezzo
14 mm	00105655	00105652	00105667	189,00
18 mm	00105656	00105653	00105668	239,00
22 mm	00105657	00105654	00105669	269,00

spessore	B LIGHT	C LIGHT	D LIGHT	prezzo
14 mm	00105658	00105661	00105664	189,00
18 mm	00105659	00105662	00105665	239,00
22 mm	00105660	00105663	00105666	269,00



Katana Zirconia STML - UTML Kuraray Noritake

KATANA UTML e STML sono le nuove zirconie Ultra e Super traslucanti multistrato.

Rappresentano un significativo sviluppo dei restauri monolitici CAD/CAM in termini di estetica e di riduzione degli spessori, in linea con la più moderna odontoiatria micro-invasiva e le attuali necessità del mercato.

La nuova formulazione di KATANA UTML e STML è rivoluzionaria: è stata adottata la zirconia cubica c-Y-TZP come soluzione tecnologica per elevare la traslucenza e ridurre l'eccessiva luminosità (valore) che, fino ad oggi, ha limitato la resa estetica dei restauri monolitici in zirconia.

La nuova formulazione di KATANA con zirconia cubica, possiede nuove e straordinarie proprietà di resistenza all'invecchiamento.

KATANA UTML e STML offre una traslucenza superiore al disilicato di litio con spessori più sottili. Inoltre, la colorazione interna multistrato simula il naturale decorso cromatico, come nei denti naturali, replicando le sfumature della dentina e dello smalto.

Con KATANA sono realizzabili corone anteriori molto sottili di soli 0,8 mm (1 mm per i posteriori) e faccette ultrasottili di 0,4 mm, grazie alle ottime performance di resistenza meccanica con valori di 550 MPa (UTML) e 750 MPa (STML).



SPESSORE 14 mm conf. 1 pz

euro 189,00

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00106794	00106797	00106800	00106803	00118875	00118878	00118881
B3	C1	C2	C3	D2	D3	ENW
00118884	00118887	00118890	00118894	00118897	00118900	00106806

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz

 euro **239,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00106795	00106798	00106801	00106804	00118876	00118879	00118882
B3	C1	C2	C3	D2	D3	ENW
00118885	00118888	00118891	00118895	00118898	00118901	00106808

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz

 euro **269,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00106796	00106799	00106802	00106805	00118877	00118880	00118883
B3	C1	C2	C3	D2	D3	ENW
00118886	00118889	00118893	00118896	00118899	00118902	00106809

KATANA UTML DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

spessore	A 1	A 2	A 3	A 3.5	A 4	euro
14 mm	00107953	00107955	00107957	00107959	00107961	189,00
18 mm	00107954	00107956	00107958	00107960	00107962	239,00
22 mm	00118903	00118904	00118905	00118906	00118907	269,00
spessore	B 1	B 2	B 3	B 4	C1	euro
14 mm	00107963	00107968	00107970	00107972	00107979	189,00
18 mm	00107967	00107969	00107971	00107978	00107980	239,00
22 mm	00118908	00118909	00118910	00118911	00118912	269,00
spessore	C 2	C 3	C 4	D 2	D 3	euro
14 mm	00107981	00107983	00107985	00107987	00107989	189,00
18 mm	00107982	00107984	00107986	00107988	00107990	239,00
22 mm	00118913	00118914	00118915	00118916	00118917	269,00
spessore	D 4	EA 1	EA 2	EA 3		euro
14 mm	00107991	00106810	00106813	00106816		189,00
18 mm	00107992	00106811	00106814	00106817		239,00
22 mm	00118918	00106812	00106815	00106818		269,00



CAD-CAM G-30


Nacera Pearl Q3 Shade VITA Shade

A-light A1-A2
 A-dark A3-A3.5
 B-light B1-B2
 B-dark B3-B4
 C-light C1-C2


Disco Nacera Pearl Q³ Multi-Shade Nacera

Zirconia policromatica, altamente traslucida con un colore finemente sfumato e una perfetta corrispondenza alla scala VITA. Ideale per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a 3 elementi, faccette, inlay, onlay; sistema ergonomico per raggiungere le tonalità più comuni.

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz

 euro **200,00**

A-LIGHT	A-DARK	B-LIGHT	B-DARK	C-LIGHT
00117210	00117212	00117214	00117216	00117218

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz

 euro **235,00**

A-LIGHT	A-DARK	B-LIGHT	B-DARK	C-LIGHT
00117211	00117213	00117215	00117217	00117219

Disco Nacera Pearl 1 Nacera

Ossido di zirconio altamente traslucido per restauri dall'aspetto naturale. Di colore bianco è la base ideale per l'estetica dentale. I dischi possono essere lavorati dai fresatori più diffusi, per risultati costanti. Rifinito con stain e glaze o con la tecnica cut-back è l'ideale per corone monolitiche e ponti.

ZR PEARL 1 BIANCO DISCO C/COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.3 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 10 mm conf. 1 pz	euro 101,70	00109438
SPESSORE 12 mm conf. 1 pz	euro 118,40	00109439
SPESSORE 14 mm conf. 1 pz	euro 131,70	00109440
SPESSORE 16 mm conf. 1 pz	euro 155,00	00109441
SPESSORE 18 mm conf. 1 pz	euro 158,40	00109442
SPESSORE 20 mm conf. 1 pz	euro 176,70	00109443
SPESSORE 25 mm conf. 1 pz	euro 210,00	00109445



Disco Nacera Pearl Multi-Shade Nacera

Nuova generazione di zirconia multi shade con cui si ottengono dei risultati estetici simili a quelli naturali: nessun stacco di colore ma una naturale transizione. Disponibile secondo le quattro famiglie di colori Vita: A, B, C, D. La loro applicazione è molto semplice: a seconda del posizionamento in altezza, ad esempio, i colori A3, A2 o A1 possono essere raggiunti utilizzando un disco A. Lo stesso vale per gli altri colori. Si dispone così di un sistema multi-layered efficiente ed ergonomico, che copre quasi tutti i colori della scala Vita con l'utilizzo di solo 4 differenti blanks. Il materiale può essere rifinito con la tecnica full contour, con stratificazione cut-Back. Resistenza alla flessione (biassiale) 1400MPa.

ZR MULTI SHADE DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.3 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz		euro 174,00	
SHADE A	SHADE B	SHADE C	SHADE D
00109404	00109405	00109406	00109407

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz		euro 230,00	
SHADE A	SHADE B	SHADE C	SHADE D
00109408	00109409	00109410	00109411

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz		euro 278,00	
SHADE A	SHADE B	SHADE C	SHADE D
00109412	00109413	00109414	00109415

Disco Nacera Pearl Shaded 16 + 2 Nacera

Zirconia ad altissima traslucenza, che garantisce restauri naturali. Perfetta combinazione di estrema resistenza alla flessione (1200MPa) ed elevata traslucenza per una massima estetica.

Disponibile in 18 colori perfettamente corrispondenti alla scala Vita.

Ideale per la produzione di monoliti, ma anche per sottostrutture da caratterizzare.

PEARL SHADED 16 + 2 3Y-TZP DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98.2 mm

SPESSORE 12 mm conf. 1 pz						euro 146,30	
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1		
00110248	00110253	00110259	00110264	00110271	00110277		
B2	B3	B4	C1	C2	C3		
00110283	00110289	00110295	00110302	00110308	00110314		
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3		
00110322	00110329	00110335	00110341	00110347	00110353		

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz						euro 163,40	
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1		
00110249	00110254	00110260	00110265	00110272	00110278		
B2	B3	B4	C1	C2	C3		
00110284	00110290	00110296	00110303	00110309	00110315		
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3		
00110323	00110330	00110336	00110342	00110348	00110354		

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz						euro 192,00	
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1		
00110123	00110255	00110122	00110266	00110273	00110279		
B2	B3	B4	C1	C2	C3		
00110285	00110291	00110297	00110304	00110310	00110316		
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3		
00110324	00110331	00110337	00110343	00110349	00110355		





SPESSORE 18 mm conf. 1 pz					euro 197,60
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00110250	00110256	00110261	00110267	00110274	00110280
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00110286	00110292	00110298	00110305	00110311	00110317
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3
00110325	00110332	00110338	00110344	00110350	00110356

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz					euro 207,10
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00110251	00110257	00110262	00110269	00110275	00110281
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00110287	00110293	00110299	00110306	00110312	00110318
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3
00110327	00110333	00110339	00110345	00110351	00110357

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz					euro 241,30
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00110252	00110258	00110263	00110270	00110276	00110282
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00110288	00110294	00110300	00110307	00110313	00110319
C4	D2	D3	D4	OM2	OM3
00110328	00110334	00110340	00110346	00110352	00110358

Nacera Clean Nacera

Polvere per la pulizia dei forni di sinterizzazione in grado di assorbire le impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature. I solventi presenti nei colori e utilizzati durante la fase di pittura, causano un serio danneggiamento delle resistenze e della camera del forno di sinterizzazione. Nacera Clean è in grado di assorbire queste impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature. Il ciclo di pulizia profonda, seguito da una serie di cicli programmati mantiene il forno integro ed evita il deterioramento delle resistenze, della camera di combustione e l'inquinamento dei pezzi in zirconia. Si raccomanda una pulizia profonda con lo starter KIT da 200 g e un mantenimento successivo programmato con i KIT da 30 g.

NACERA CLEAN	euro	codice
confezione Bundle 200 gr + 4 da 30gr	220,00	00109416

Nacera Blue X Nacera

Un vantaggio notevole che permette di personalizzare ed aumentare la traslucenza dei dischi in zirconia Pearl 1. Il risultato estetico è molto simile al disilicato di litio. Blue-X Liquid è stato sviluppato per la Zirconia Precolorata Nacera. Quando applicato nella zona incisale ed Occlusale il Croma viene abbassato, generando un realistico effetto sfumato, simile a un multistrato. Aumento della traslucenza in modo selettivo e per ogni zirconia precolorata. Aumento della traslucenza solo dove si desidera: cuspidi, zona anteriore e incisale, mantenendo inalterate le proprietà meccaniche.

NACERA BLUE X	euro	codice
flacone da 10 ml	125,00	00110237
+ 1 pennello Classic Brush! + 1 Nacera Bowl + istruzioni		

IPS e.max ZirCAD Disco Ivoclar Vivadent

IPS e.max ZirCAD è il materiale di scelta quando hanno priorità l'elevata resistenza meccanica, minimi spessori ed una naturale estetica. Queste sono le caratteristiche nelle quali IPS e.max ZirCAD definisce nuovi standard. Grazie all'elevata stabilità fra 850 e 1.200 MPa e contemporaneamente elevata tenacia alla rottura, si possono ridurre notevolmente gli spessori delle pareti. Senza compromessi nella traslucenza.

IPS e.max ZirCAD LT il materiale di questo "allrounder" unisce elevata resistenza meccanica (1'200 MPa) ad una buona estetica. IPS e.max ZirCAD LT consente pertanto la realizzazione di restauri di denti singoli mininvasivi e stabili sottostrutture di più elementi. Le sovracostruzioni di impianti completano la gamma. Quindi si possono realizzare restauri monolitici, con pittura ad infiltrazione, con rivestimento parziale o totale. Indicazioni: sottostrutture di tre o più elementi; sottostrutture di corone; sovracostruzioni a supporto implantare; ponti monolitici di tre o più elementi, corone monolitiche; sovracostruzioni a supporto implantare.

IPS e.max ZirCAD MO è stato sviluppato per la classica tecnica di rivestimento estetico. Grazie alla sua maggiore opacità si possono coprire in modo ottimale anche monconi discromici e ricostruzioni in metallo. IPS e.max ZirCAD MO consente la realizzazione di restauri individuali ed altamente estetici con un'eccellente resistenza alla flessione di 1.150 MPa ed elevata tenacia alla rottura. Indicazioni: sottostrutture di tre o più elementi; sottostrutture di corone; sovracostruzioni a supporto implantare.

Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 10 mm					euro 120,00	
0	1	2	3	4		
00121514	00121519	00121524	00121529	00121534		
DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 14 mm					euro 140,00	
0	1	2	3	4		
00121515	00121520	00121525	00121530	00121535		
DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 18 mm					euro 160,00	
0	1	2	3	4		
00121516	00121521	00121526	00121531	00121536		
DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 20 mm					euro 180,00	
0	1	2	3	4		
00121517	00121522	00121527	00121532	00121537		
DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 25 mm					euro 210,00	
0	1	2	3	4		
00121518	00121523	00121528	00121533	00121538		

IPS e.max ZirCAD Disco Ivoclar Vivadent

Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 10 mm					euro 130,00	
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121409	00121416	00121423	00121430	00121437	00121500	00121507
DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 12 mm					euro 140,00	
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121410	00121417	00121424	00121431	00121438	00121501	00121508
DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 14 mm					euro 150,00	
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121411	00121418	00121425	00121432	00121439	00121502	00121509



DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 16 mm

euro **160,00**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121412	00121419	00121426	00121433	00121440	00121503	00121510

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 18 mm

euro **170,00**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121413	00121420	00121427	00121434	00121441	00121504	00121511

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 20 mm

euro **180,00**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121414	00121421	00121428	00121435	00121442	00121505	00121512

Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 10 mm

euro **130,00**

A1	A2	A3	B1
00121444	00121451	00121458	00121465
B2	C2	D2	BL
00121472	00121486	00121493	00121479

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 12 mm

euro **140,00**

A1	A2	A3	B1
00121445	00121452	00121459	00121466
B2	C2	D2	BL
00121473	00121487	00121494	00121480

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 14 mm

euro **150,00**

A1	A2	A3	B1
00121446	00121453	00121460	00121467
B2	C2	D2	BL
00121474	00121488	00121495	00121481

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 16 mm

euro **160,00**

A1	A2	A3	B1
00121447	00121454	00121461	00121468
B2	C2	D2	BL
00121475	00121489	00121496	00121482

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 18 mm

euro **170,00**

A1	A2	A3	B1
00121448	00121455	00121462	00121469
B2	C2	D2	BL
00121476	00121490	00121497	00121483

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 20 mm

euro **180,00**

A1	A2	A3	B1
00121449	00121456	00121463	00121470
B2	C2	D2	BL
00121477	00121491	00121498	00121484

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 25 mm

euro **220,00**

A1	A2	A3	B1
00121450	00121457	00121464	00121471
B2	C2	D2	BL
00121478	00121492	00121499	00121485



IPS e.max ZirCAD Disco Ivoclar Vivadent

IPS e.max ZirCAD MT Multi è indicato per i settori anteriori e posteriori. Una miscela di materie prime ottimizzata provvede a caratteristiche meccaniche ottimizzate (850 MPa). Il decorso cromatico e di traslucenza conferisce alle corone ed i ponti monolitici la massima estetica anche senza caratterizzazione, aumentando l'efficienza in laboratorio. La riproduzione del colore dentale viene facilitata dai dischi policromatici nei colori A-D. Indicazioni: corone monolitiche; ponti monolitici di 3 elementi; sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori.

IPS e.max ZirCAD MT è il più creativo nel portafoglio prodotti. Grazie alla miscela di materie prime ottimizzata, il materiale unisce una buona resistenza (850 MPa) ad un'estetica convincente. Le diverse opzioni di lavorazione consentono un'elevata flessibilità. Il concetto cromatico A-D è orientato all'efficiente realizzazione di restauri estetici monolitici oppure stratificati. I liquidi A-D colouring Liquids ed Effect consentono la massima creatività individuale prima della sinterizzazione. Indicazioni: corone; ponti di tre elementi; sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori.

Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

DISCO ZIRCAD MT SPESSORE 14 mm euro 160,00

A1	A2	A3	B1
00121539	00121541	00121543	00121545
B2	C2	D2	BL
00121547	00121551	00121553	00121549

DISCO ZIRCAD MT SPESSORE 18 mm euro 180,00

A1	A2	A3	B1
00121540	00121542	00121544	00121546
B2	C2	D2	BL
00121548	00121552	00121554	-

DISCO ZIRCAD MT MULTI SPESSORE 16 mm euro 200,00

A1	A2	A3	B1
00121555	00121557	00121559	00121561
B2	C2	D2	BL
00121563	00121567	00121569	00121565

DISCO ZIRCAD MT MULTI SPESSORE 20 mm euro 220,00

A1	A2	A3	B1
00121556	00121558	00121560	00121562
B2	C2	D2	BL
00121564	00121568	00121570	00121566

K2 Zircon blanks Yeti

- Dischi di Zirconio ad alta resistenza pre-sinterizzati e stabilizzati ad ittrio per ponti e corone.
- Alta biocompatibilità
- Densità omogenea e grana fine per superfici lisce.
- highly stable edges
- Un processo di sinterizzazione specifico per il bianco e uno per il traslucente
- Granulometria: < 0,5µ
- Resistenza alla rottura: 9-10 MPa m 1/2
- Bending strength: 900 – 1100 MPa
- CET: 10,6
- Densità white classic: 6,08g / cm³, translucent: 6,05g / cm³
- Modulo di elasticità: 200 GPa
- Durezza Vickers: 1000-1300



K2 Zircon blanks Yeti

K2 ZIRCON BLANKS WHITE Ø98,50mm.

	euro	codice
Spessore 10,0 mm	100,60	396-0010
Spessore 12,0 mm	109,00	396-0012
Spessore 14,0 mm	114,50	396-0014
Spessore 16,0 mm	131,30	396-0016
Spessore 18,0 mm	145,40	396-0018
Spessore 20,0 mm	156,60	396-0020
Spessore 25,0 mm	192,90	396-0025

K2 ZIRCON BLANKS TRANSLUCENT Ø98,50mm.

Spessore 10,0 mm	122,90	397-0010
Spessore 12,0 mm	134,10	397-0012
Spessore 14,0 mm	142,60	397-0014
Spessore 18,0 mm	181,60	397-0018
Spessore 20,0 mm	198,40	397-0020
Spessore 25,0 mm	226,30	397-0025

Zyttria Anterior Concept

Questa zirconia è particolarmente adatta per denti anteriori, cappette e ponti con max 3 elementi, per la realizzazione di protesi monolitiche o stratificate. Zyttria®Z403 Anterior offre una trasmittanza della luce di quasi il 50% e un livello di traslucenza superiore del 15-20% ca. rispetto a Zyttria® Z402 Extra-Traslucente e Zyttria® Z402 Extra-Traslucente Plus. Resistenza alla Flessione doppia rispetto al Disilicato di Litio. La resistenza a flessione a 3 punti è di ca. 600+100 Mpa, valore pressoché doppio rispetto ai manufatti in Disilicato di Litio. La microstruttura e lo stato allotropico di Z403 Anterior, a temperatura ambiente, risulta completamente tetragonale in forma stabile (con modesta quantità cubica). Questa caratteristica, oltre a una maggiore traslucenza (maggiore passaggio di luce), determina un'alta resistenza agli agenti chimici e, soprattutto, maggiore resistenza all'invecchiamento.

ZYTTRIA Z403 ANTERIOR (sint. 1450°C)

DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm

altezza	12	14	18	20	25
codice	00102370	00102371	00102372	00102373	00102374
prezzo	133,40	143,40	180,00	200,00	253,40
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz



Zyttria Anterior Concept

Zirconia Zyttria® Concept

Non basta scegliere la Zirconia per essere certi dei risultati! ZYTTRIA® by CONCEPT

- Granulometrica selezionata, tramite trattamento ad alta qualità della materie prime con tecnologia giapponese.
- Pressatura isostatica fino a 4000 kg/cm², che garantisce resistenza meccanica e all'invecchiamento, oltre che ritiri uniformi e omogenei.
- Zyttria Z402 Extra-Traslucent PLUS, grazie ad un'innovativa formulazione delle polveri, consente una altissima traslucenza a soli 1450°C (stessa temperatura di sinterizzazione del White).
- Completezza del sistema: blocchetti, piastre e dischi per tutti i sistemi CAD/CAM maggiormente affermati.
- Certificazione di Qualità e Registrazione al Ministero della Salute



Dischi Sistema Wieland* Concept (e altri sistemi)

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS (sint. 1450°C)

DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm

altezza	10	12	14	16	18	20	25
codice	00094937	00094938	00094939	00094940	00094941	00094942	00094943
prezzo	120,00	125,00	130,00	150,00	170,00	186,70	225,00
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

ZYTTRIA Z COLOR EXTRA PLUS Precolorato ad alta traslucenza in 3 colori: 05/LIGHT - 10/INTENSIVE - 20/MEDIUM, Temperatura di sinterizzazione 1450°C. La colorazione del manufatto protesico, dopo la sinterizzazione, risulta omogenea in tutto il pezzo.

DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare

colore	05/LIGHT	10/INTENSIVE	20/MEDIUM	05/LIGHT	10/INTENSIVE	20/MEDIUM	05/LIGHT	10/INTENSIVE	20/MEDIUM	05/LIGHT	10/INTENSIVE	20/MEDIUM
altezza	14	14	14	18	18	18	20	20	20	25	25	25
codice	00102639	00101468	00102640	00102642	00100065	00102643	00102646	00102647	00100284	00104232	00101089	00104233
prezzo	143,40	143,40	143,40	178,40	178,40	178,40	200,00	200,00	200,00	253,40	253,40	253,40
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

Dischi Sistema ZirkonZahn* Concept

ZYTTRIA Z403 ANTERIOR

DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm

altezza	14	18	22
codice	00108352	00108353	00106924
prezzo	153,40	193,40	241,70
conf.	1 pz	1 pz	1 pz

ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT

DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm

altezza	10	14	18	22	25
codice	00092359	00092360	00092361	00092362	00095112
prezzo	116,70	133,40	170,00	221,70	250,10
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS (sint. 1450°C)

DISCO COMPATIBILE SISTEMA ZIRKONZAHN / Ø 95 mm

altezza	12	14	18	22
codice	00094946	00094947	00094948	00094949
prezzo	138,40	146,70	186,70	233,40
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz



Piastra Sistema Amann Girrbach* Concept

ZYTTRIA Z401 WHITE TRASLUCENT Bianco Traslucente, (sint. 1450°C) Resistenza alla flessione (3 punti) >1000Mpa.

PIASTRA SISTEMA AMANN GIRRBACH / ZI 71 - TEC

spess.	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
codice	00094957	00094958	00094959	00094960	00094961	00094962
prezzo	116,70	125,00	138,40	155,00	170,00	205,00
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz

ZYTTRIA Z402 EXTRA-TRASLUCENT PLUS (sint. 1530°C) Bianco EXTRA Traslucente, Resistenza alla flessione (3 punti) >800Mpa.

PIASTRA SISTEMA AMANN GIRRBACH / ZI 71 - TEC

spess.	14 mm	16 mm	20 mm
codice	00095106	00094963	00095107
prezzo	130,00	150,00	186,70
conf.	1 pz	1 pz	1 pz



Piastra Sistema Amann Girrbach Concept

Copran Zri Whitepeaks

- Zirconio classico con la massima resistenza alla flessione per ponti fino a 14 elementi intermedi
- Pressatura isostatica
- Garanzia di durata a vita
- Disponibile in Bianco o precolorato A1, A2, A3



COPRAN Zri Bianco		euro	codice
Ø 98mm	altezza 10mm.	104,50	
Ø 98mm	altezza 14mm.	123,50	
Ø 98mm	altezza 18mm.	153,90	
Ø 98mm	altezza 22mm.	184,30	
Ø 95mm ZZ	altezza 12mm.	118,75	
Ø 95mm ZZ	altezza 16mm.	146,30	
Ø 95mm ZZ	altezza 22mm.	185,25	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 12mm.	89,30	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 16mm.	114,95	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 20mm.	142,50	

COPRAN Zri A1, A2, A3		euro	codice
Ø 98mm	altezza 10mm.	115,90	
Ø 98mm	altezza 14mm.	138,70	
Ø 98mm	altezza 18mm.	172,90	
Ø 98mm	altezza 22mm.	190,00	
Ø 95mm ZZ	altezza 12mm.	132,05	
Ø 95mm ZZ	altezza 16mm.	171,95	
Ø 95mm ZZ	altezza 22mm.	193,80	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 12mm.	118,75	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 16mm.	159,60	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 20mm.	186,20	

Copran Supreme HT Whitepeaks

Il nuovo zirconio HT con maggiore trasparenza ed elevata resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per cappette e restauri completamente anatomici per un massimo di 14 unità. Pressatura isostatica con garanzia a vita

Disponibile in Bianco o precolorato in A1, A2, A3, B1, B2, C2

COPRAN Supreme HT Bianco		euro	codice
Ø 98mm	altezza 10mm.	112,10	
Ø 98mm	altezza 14mm.	131,10	
Ø 98mm	altezza 18mm.	161,50	
Ø 98mm	altezza 22mm.	191,90	
Ø 95mm ZZ	altezza 12mm.	125,40	
Ø 95mm ZZ	altezza 16mm.	150,10	
Ø 95mm ZZ	altezza 22mm.	195,70	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 12mm.	89,30	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 16mm.	114,95	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 20mm.	142,50	

COPRAN Supreme HT A1, A2, A3, B1, B2, C2		euro	codice
Ø 98mm	altezza 10mm.	123,50	
Ø 98mm	altezza 14mm.	146,30	
Ø 98mm	altezza 18mm.	180,50	
Ø 98mm	altezza 22mm.	197,60	
Ø 95mm ZZ	altezza 12mm.	138,70	
Ø 95mm ZZ	altezza 16mm.	167,20	
Ø 95mm ZZ	altezza 22mm.	201,40	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 14mm.	145,35	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 16mm.	155,80	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 20mm.	188,10	

CopraSupreme Symphony Whitepeaks

7 strati (4 strati più 3 strati di transizione), zirconio flessibile con elevata traslucenza e maggiore resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per cappette e restauri completamente anatomici per un massimo di 14 unità. Nel processo di produzione, 4 strati di zirconio pre-colorato sono sovrapposti uno sull'altro, costruendo 3 strati di transizione nel processo. Il risultato è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci

Disponibile con 7 strati precolorati nei colori A1, A2, A3, B1, B2,

CopraSupreme Symphony		euro	codice
Ø 98mm	altezza 12mm.	169,10	
Ø 98mm	altezza 14mm.	184,30	
Ø 98mm	altezza 18mm.	229,90	
Ø 98mm	altezza 20mm.	252,70	
Ø 95mm ZZ	altezza 12mm.	172,90	
Ø 95mm ZZ	altezza 16mm.	210,90	
Ø 95mm ZZ	altezza 20mm.	265,05	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 14mm.	189,05	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 16mm.	237,50	
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er	altezza 20mm.	261,25	



Copran® Monolith Whitepeaks

Il nuovo zirconio HT ad alta traslucenza e alta resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per cappette e restauri completamente anatomici per un massimo di 14 unità.

Pressatura isostatica con garanzia a vita

Disponibile in bianco o precolorato nei colori A1, A2, A3, B1, B2, C2

Copran® Monolith		euro	codice
Ø 98mm bianco	altezza 14mm.	131,10	
Ø 98mm bianco	altezza 18mm.	161,50	
Ø 98mm bianco	altezza 22mm.	191,90	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	146,30	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 18mm.	180,50	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	197,60	
Ø 95mm ZZ bianco	altezza 12mm.	125,40	
Ø 95mm ZZ bianco	altezza 16mm.	150,10	
Ø 95mm ZZ bianco	altezza 22mm.	195,70	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 12mm.	138,70	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	167,20	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 22mm.	184,30	
Amann G. Ceramill Motion 72er bianco	altezza 12mm.	89,30	
Amann G. Ceramill Motion 72er bianco	altezza 16mm.	114,95	
Amann G. Ceramill Motion 72er bianco	altezza 20mm.	142,50	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	145,35	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	155,80	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	188,10	



Copran® Monolith Symphony Whitepeaks

7 strati (4 strati più 3 strati di transizione), zirconio traslucido con elevata traslucenza e alta resistenza alla flessione (circa 1100 Mpa) per cappette e restauri completamente anatomici per un massimo di 14 unità. Nel processo di produzione, 4 strati di zirconio pre-colorato sono sovrapposti uno sull'altro, costruendo 3 strati di transizione nel processo. Il risultato è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci.

Disponibile con 7 strati precolorati nei colori A1, A2, A3, B1, B2, C2

Copran® Monolith Symphony		euro	codice
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	184,30	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 18mm.	229,90	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	252,70	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	189,05	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	215,65	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	261,25	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	189,05	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	215,65	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	261,25	



CopraSmile Whitepeakx

Zirconio isostaticamente premuto con massima traslucenza per restauri anteriori o posteriori con un massimo di 3 unità. Resistenza alla flessione di circa 600 Mpa
Disponibile in bianco e precolorazione nel colore A1, A2, A3, B1, B2, C2



CopraSmile		euro	codice
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 10mm.	131,10	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	150,10	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 18mm.	180,50	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	165,30	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 18mm.	199,50	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	216,60	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 12mm.	157,70	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	186,20	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 28mm.	203,30	

CopraSmile Symphony Whitepeaks

Zirconio a 7 strati (4 strati più 3 strati di transizione) con la massima traslucenza per restauri anteriori o posteriori con un massimo di 3 unità. Nel processo di produzione, 4 strati di zirconio pre-colorato sono sovrapposti uno sull'altro, costruendo 3 strati di transizione nel processo. Il risultato è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci.

- Disponibile a 7 strati con precolorazione nei colori A1, A2, A3, B1, B2, C2
- Resistenza alla flessione di circa 600 Mpa



CopraSmile Symphony		euro	codice
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	203,30	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 18mm.	248,90	
Ø 98mm A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	271,70	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	207,10	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	229,90	
Ø 95mm ZZ A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	275,50	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 14mm.	218,50	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 16mm.	245,10	
Amann G. A1, A2, A3, B1, B2, C2	altezza 20mm.	288,80	

Dischi Composito

Nacera Hybrid Nacera

Composito ibrido polimero/ceramica, che offre una durezza Vickers che più si avvicina alla dentina naturale. Ideale per corone parziali, corone singole e strutture per ponti nei settori anteriori e posteriori, ridotte o totalmente anatomiche, fino a 16 elementi con al massimo un elemento intermedio. Disponibili in blocchetto o disco.

DISCO Ø 98,3 mm - sp. 15 mm - coll. 10 mm conf. 1 pz euro **395,00**

A1	A2	A3	B1
00120967	00120968	00120969	00120970
C2	D2	BL2	BL3
00120971	00120973	00120974	00123115

DISCO Ø 98,3 mm - sp. 20 mm - coll. 10 mm conf. 1 pz euro **420,00**

A1	A2	A3	B1
00120975	00120976	00120977	00120978
C2	D2	BL2	BL3
00120979	00120980	00120981	00123116

CAD-Temp multiColor DISC Vita

Dischi in composito per la realizzazione di provvisori di riabilitazione con quattro strati di differente intensità cromatica. Sono costituiti da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle, hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità. Indicazioni: corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.

Disponibili in 3 colori 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T.

VITA CAD-TEMP MULTICOLOR DISC				euro	codice
DISC	Ø 98 - h 18 mm	1M2T	conf. 1 pz	205,90	00099222
DISC	Ø 98 - h 18 mm	2M2T	conf. 1 pz	205,90	00099223
DISC	Ø 98 - h 18 mm	3M2T	conf. 1 pz	205,90	00099224

VITA CAD-Temp multiColor DISC



Dischi PMMA e Resine

ProArt CAD Splint Ivoclar Vivadent

Dischi in materiale PMMA trasparente. Con questi dischi si realizzano barre a supporto occlusale, p.es. nell'ambito della terapia di bruxismo, si possono inoltre realizzare dime chirurgiche da usare nel campo dell'implantologia.

Indicazioni: trattamento terapeutico in caso di correzione di problemi all'articolazione mandibolare e al piano di masticazione. Barre a supporto occlusale. Dime chirurgiche.

PROART CAD SPLINT PMMA collare 10 mm	euro	codice
CLEAR Ø 98,5 mm - sp. 16 mm conf. 1 pz	55,00	00121373
CLEAR Ø 98,5 mm - sp. 20 mm conf. 1 pz	60,00	00121374

ProArt CAD Tray-In Ivoclar Vivadent

Disco bianco in PMMA per prove funzionali. In tal modo può realizzare il restauro finale, p.es. in caso di realizzazione di protesi digitali, secondo i desideri del paziente e con la migliore precisione possibile. I dischi possono inoltre essere utilizzati per la realizzazione digitale di cucchiai e porta impronte funzionali. Le resine ProArt CAD coprono un ampio spettro di indicazioni. Il vantaggio: i dischi rimangono stabili nella forma anche in caso di notevole lavorazione, mantenendo quindi in modo preciso le dimensioni dell'oggetto. Indicazioni: prove funzionali nonché cucchiai e porta impronte funzionali ProArt CAD Transfer.

PROART CAD TRAY-IN PMMA collare 10 mm	euro	codice
WHITE Ø 98,5 mm - sp. 10 mm conf. 1 pz	39,00	00121376

ProArt CAD Transfer Ivoclar Vivadent

Dischi in resina stabili nella forma e facilmente fresabili. In qualità di materiali ausiliari, supportano i diversi processi digitali e coprono un ampio spettro di indicazioni. ProArt CAD Transfer sono dischi in polioossimetilene (POM), per la realizzazione di mascherine di trasferimento. Consentono l'incollaggio di denti artificiali preconfezionati in una base protesica realizzata al CAD/CAM. In questo modo è possibile determinare in modo preciso la posizione dei denti. Le resine ProArt CAD coprono un ampio spettro di indicazioni. Il vantaggio: i dischi rimangono stabili nella forma anche in caso di notevole lavorazione, mantenendo quindi in modo preciso le dimensioni dell'oggetto.

Grazie alla facile lavorazione del materiale, in breve tempo si ottiene un risultato di precisione. Per il restauro pianificato, questa fase di lavoro intermedia può rappresentare un aspetto determinante, in quanto la formazione uniforme di trucioli riduce l'imbrattamento nell'apparecchiatura. Indicazioni: mascherine di trasferimento.


PROART CAD TRANSFER POLIOSSIMETILENE (POM)	euro	codice
Ø 98,5 mm - sp. 10 mm - collare 10 mm conf. 2 pz	25,00	00121375

SR Vivodent Cad Ivoclar Vivadent

Gamma di dischi di colore dentale in materiale DCL per la realizzazione di denti singoli e segmenti dentali per protesi digitali. Il materiale si distingue per la colorazione traslucida con una naturale fluorescenza. Un'ottima estetica si ottiene grazie ai tre fattori principali: minima opacità in combinazione con la forma anatomica ed un naturale design superficiale. I denti singoli e le intere arcate vengono disegnate e prodotte individualmente. Il restauro protesico viene adattato individualmente agli antagonisti naturali. Anche casi difficili possono essere risolti senza problemi.

Ø98,5mm - sp. 20mm - coll.10mm conf. 1 disco **euro 80,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00123130	00122628	00122629	00123131	00123132
B3	C2	D2	BL3	
00123133	00123134	00123135	00123129	

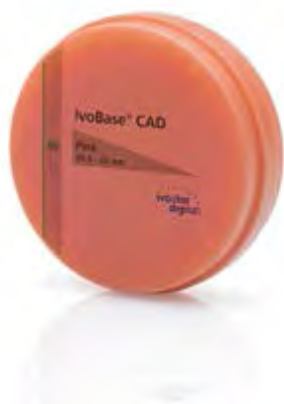

Telio CAD Ivoclar Vivadent

Blocchetti e dischi in **PMMA** reticolato, per la realizzazione di provvisori a lungo termine mediante la tecnica CAD/CAM. (Permanenza massima in cavo orale 12 mesi). Da questi si possono realizzare corone, ponti e corone abutment ibride. Il processo di polimerizzazione industriale rende il materiale molto omogeneo. In questo modo Telio CAD è facilmente lavorabile. Prima della cementazione, si può scegliere se soltanto lucidare il restauro oppure se individualizzarlo con i supercolori e le masse da stratificazione del composito fotoindurente da laboratorio SR Nexco.

Indicazioni: corone e ponti provvisori; corone abutment ibride provvisorie.

Ø 98,5mm - coll.10mm

DISCO TELIO CAD LT SPESSORE 16 mm

euro **70,00**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00121400	00121382	00121385	00121388	00121391
B1	B3	C2	D2	
00121394	00121397	00121403	00121406	



CAD/CAM PMMA Blanks Yeti

Monocolore, trasparente o multicolore

- Per la produzione di corone provvisorie e ponti
- Alta resistenza alla rottura e grande facilità di lavorazione
- Molto naturale ed estetica
- stratificazione creata secondo la dentatura naturale (Blanks multicolore)
- Disponibile in diversi colori: Monocolore e Multicolore Ø 98,5 mm

Colore	A1	A2	A3	B1	euro
h 18mm.	3984118	3984218	3984318		97,00
h 20mm.		3980220	3980320	3981120	67,30
h 25mm.		3980225	3980325	3981125	69,10
h 20mm. trasparente				3988020	49,30



Disco PMMA Monostrato Ruthinium

Dischi monostrato per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata. Disco Ø 98.5 mm - collare 10 mm.

SPESSORE 16 mm

euro **63,60**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00117244	00117245	00117246	00117247	00117248	00117249
B2	B3	C2	C3	D2	D3
00117250	00117251	00117252	00117253	00122327	00120384
PINK		RX		TRANSPARENT	
00119384		00119386		00119385	

SPESSORE 20 mm

euro **63,60**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00119374	00119375	00119376	00119377	-	00119378
B2	B3	C2	C3	D2	D3
00119379	-	-	00119380	00122328	-
PINK		RX		TRANSPARENT	
00119381		00119383		00119382	



PMMA Biostar

Disco da fresatura in polimetil-metacrilato per il controllo dell'adattabilità e della funzionalità e per la fusione. PMMA Biostar brucia completamente senza lasciare residui.

PMMA Biostar	euro	codice
Trasparente Ø 98.5 mm x 14mm.	26,50	PMB14
Avorio Ø 98.5 mm x 14mm.	26,50	PMBV14
Blu Ø 98.5 mm x 14mm.	26,50	PMBB14
Trasparente Ø 98.5 mm x 18mm.	31,50	PMB18
Avorio Ø 98.5 mm x 18mm.	31,50	PMBV18
Blu Ø 98.5 mm x 18mm.	31,50	PMBB18



Disco PMMA Multilayer Ruthinium

Dischi in PMMA multistrato per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, realizzati con resina ad alto peso molecolare cross-linked, che garantisce fedeltà nella riproduzione dei dettagli e resistenza anche a spessori sottili.

Disco Ø 98.5 mm - collare 10 mm.

SPESSORE 16 mm

euro **95,40**

A1	A2	A3	A3.5
00118125	00119387	00118465	00119388
B1	B2	C3	D3
00119389	00119390	00119391	00118757

SPESSORE 20 mm

euro **95,40**

A1	A2	A3	A3.5
00116900	00117384	00116836	00116905
B1	B2	C3	D3
00119392	00119393	00116837	-

Copra Temp PMMA Whitepeaks

Adatto per la fabbricazione di corone e ponti, che servono come protesi dentaria provvisoria o di lunga durata. CopraTemp è adatto anche per restauri permanenti. È estremamente resistente alla placca e può essere stratificato con resine e materiali compositi e può essere personalizzato.

COPRA TEMP PMMA Clear/A1/A2/A3/B1

euro

codice

Ø 98 mm SPESSORE 16mm	47,50
Ø 98mm SPESSORE 20mm	53,20
Ø 95mm ZZSPESSORE 16mm	51,30
Ø 95mm ZZSPESSORE 20mm	57,00
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 13mm.	74,10
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 20mm.	79,80

Copra Temp Symphony PMMA 5 layers Whitepeaks

PMMA di polimetilacrilato precolorato, 5 strati per elevate esigenze estetiche. Adatto per la fabbricazione di corone e ponti, che servono come protesi dentaria provvisoria o di lunga durata. CopraTemp Symphony è adatta anche per restauri permanenti. È estremamente resistente alla placca e può essere stratificato con resine e materiali compositi e può essere personalizzato. Il risultato dei 3 strati è una transizione cromatica estremamente naturale per restauri vivaci e vivaci.

COPRA TEMP SYMPHONY PMMA Clear/A1/A2/A3/B1

euro

codice

Ø 98 mm SPESSORE 16mm	77,90
Ø 98mm SPESSORE 20mm	83,60
Ø 95mm ZZSPESSORE 16mm	81,70
Ø 95mm ZZSPESSORE 20mm	87,40
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 13mm.	91,20
Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 20mm.	96,90



Dischi PMMA e Resine

PMMA Cam Concept

Disco in resina in polimetilmetacrilato per la realizzazione di protesi provvisorie parziali: cappette e piccoli ponti di 4/5 elementi. Buone caratteristiche di stabilità chimica e di biocompatibilità. Disponibile nei colori A2, A3 e B1.

PMMA CAM DISCO CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm

colore	A2	A3	B1	A2	A3	B1
altezza	15	15	15	20	20	20
codice	00099127	00098749	00099128	00099129	00099130	00099131
prezzo	40,00	40,00	40,00	51,70	51,70	51,70
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz



PMMA Cam Concept

Polycam Concept

Disco in poliammide per la realizzazione di corone e ponti provvisori a lungo termine. Disponibile in due altezze h 14 e h 18 mm.

DISCO PMMA CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø 98 mm / h collare 10 mm

sp.	A2	A3	B1	C1	D2	CLEAR	prezzo
14	00108357	00108358	00108359	00108360	00108361	00108109	55,00
18	00108362	00108363	00108364	00108365	00108366		73,30
cf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz



Polycam Concept

Copra Dur PA Whitepeaks

Disco di poliammide di alta qualità, altamente reticolato. CopraDur è praticamente infrangibile e quindi adatto per la fabbricazione di stecche ortodontiche con uno spessore di soli 0,5 mm. Resta molto flessibile e fornisce una superficie scivolosa molto liscia per un comfort ottimale del paziente. È possibile implementare restauri provvisori a lungo termine e temporanei e restauri permanenti di ponti e corone.

COPRA DUR PA Clear / A2 / A3 / B1

	euro	codice
Ø 98,5 mm x 15mm.	47,50	
Ø 98,5 mm x 15mm.	66,50	
Ø 95 mm ZZ x 16mm.	55,10	
Ø 95 mm ZZ x 16mm.	74,10	



Modelcam Concept

Disco in resina per modelli, disponibile ad alta o bassa densità in colore blue. Ø 98 mm altezza 25 mm.

MODEL CAM SISTEMA WIELAND

	euro	codice
LOW DENSITY BLUE conf. 1 pz	22,50	00108367
HIGH DENSITY BLUE conf. 1 pz	36,70	00108368



Polycam Concept

Peek Juvora

Le protesi JUVORA sono realizzate in polimero di grado medico, non come le protesi metalliche. JUVORA si serve solo del polimero PEEK più puro, ottenuto direttamente ed esclusivamente da Invibio®, leader globale di biomateriali PEEK, utilizzati con successo da oltre 10 anni in più di 4 milioni di dispositivi medici impiantati.



Peek Juvora

MODEL CAM SISTEMA WIELAND	euro	codice
Disco PEEK con gradino H 12mm.	189,00	009412
Disco PEEK con gradino H 16mm.	215,00	009416
Disco PEEK con gradino H 18mm.	228,00	009418
Disco PEEK con gradino H 20mm.	238,00	009420
Disco PEEK con gradino H 22mm.	248,00	009422
Disco PEEK con gradino H 25mm.	261,00	009425
Disco PEEK con gradino H 30mm.	291,00	009430

Copra Peek Bio Whitepeaks

Light / Medium / Rose / Bio Classic

L'altissima biocompatibilità di questa resina ad alta tecnologia la rende la prima scelta per le basi protesiche, per le costruzioni primarie, secondarie e terziarie, per le soprastrutture senza metallo e per i restauri di corone e ponti. CopraPeek offre il massimo comfort per il paziente grazie al suo peso minimo e alla sua bassa conduttività termica. Disponibile in dentina A2 come tonalità "Medium", "Light" grigio e tonalità gomma "Rose". CopraPeek è molto resistente alla placca, anallergico e insapore.



COPRA PEEK BIO	euro	codice
Ø 98 - h 10 mm	150,10	
Ø 98 - h 15 mm	188,10	
Ø 98 - h 20 mm	226,10	
Ø 95ZZ - h 12 mm	163,40	
Ø 95ZZ - h 16 mm	210,40	
Ø 95ZZ - h 20 mm	229,90	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 13mm	188,10	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 20mm	226,10	

ProArt CAD Model Ivoclar Vivadent

Dischi di colore beige, in poliuretano resistente all'urto (PU). Con questi dischi si realizzano modelli con la metodica digitale. Il materiale vaporizzabile possiede un'elevata densità e quindi una superficie uniforme e liscia.

Precisione nelle fasi di preparazione: tanto più precisa è la fase di preparazione e tanto più ottimale sarà il risultato. ProArt CAD, come materiale di supporto al processo, accompagna diverse fasi di lavorazione verso un risultato di elevata estetica. Le resine ProArt CAD coprono un ampio spettro di indicazioni. Il vantaggio: i dischi rimangono stabili nella forma anche in caso di notevole lavorazione, mantenendo quindi in modo preciso le dimensioni dell'oggetto. Rapido e pulito, in breve tempo si ottiene un risultato di precisione, in quanto la formazione uniforme di trucioli riduce l'imbrattamento nell'apparecchiatura. Indicazioni: realizzazione di modelli in resina.



PROART CAD MODEL POLIURETANO collare 10 mm	euro	codice
BEIGE Ø 98,5 mm - sp. 25 mm conf. 1 pz	21,00	00121372

Copra Model Poliuretano Whitepeaks

Poliuretano per modellare

Intrinsecamente stabile, resistente alla rottura e facile da fresare. Può essere pulito con vapore caldo.

Colore avorio: maggiori proprietà meccaniche e densità particolarmente adatto per circolari e monconi. Scansione senza problemi a causa della superficie opaca e non riflettente.

Colore rosa: lavorabilità rapida particolarmente adatta per basi per modelli



CUPRA MODEL POLIURETANO	euro	codice
Die Avorio Ø 98,5 mm - sp. 25 mm conf. 1 pz	24,70	
Base Marroncino Ø 98,5 mm - sp. 25 mm conf. 1 pz	24,70	

Dischi in Fibra di Vetro

Trilor Arch Bioloren

Trilor arch è costituito da fibre di vetro e resina. Viene usato come barra di rinforzo permanente, per carico immediato, chiave di trasferimento posizione impianti o guida chirurgica per impianti. Ideale per "All on four" o "All on six", oppure per lavorazioni ridotte come emiarcate o ponti. Struttura permanente.

TRILOR ARCH	euro	codice
SPESSORE 3.5 mm conf. 3 pz	120,00	00111768
SPESSORE 5.5 mm conf. 3 pz	128,00	00111388

Trilor Disk Bioloren

Disco in fibra di vetro con un intreccio speciale di fibre e resina epossidica che offre alte prestazioni. Trilor Disk è il materiale perfetto per costruire sottostrutture e arcate complete. Materiale permanente. Ø 98 mm, collare 10 mm.

TRILOR DISK	euro	codice
SPESSORE 10 mm conf. 1 pz	120,00	00110001
SPESSORE 12 mm conf. 1 pz	130,00	00110002
SPESSORE 14 mm conf. 1 pz	150,00	00110003
SPESSORE 16 mm conf. 1 pz	160,00	00110004
SPESSORE 18 mm conf. 1 pz	180,00	00110005
SPESSORE 20 mm conf. 1 pz	200,00	00110006
SPESSORE 22 mm conf. 1 pz	210,00	00110007
SPESSORE 25 mm conf. 1 pz	230,00	00110008

Bio Glass Tablet

Dischi in fibra di vetro ad alta densità per applicazioni Cad Cam, I nuovi dischi Micro Medica sono realizzati con una speciale fibra di vetro ad alta resistenza, oltre 100 strati di fibra pressata ad oltre 20 tonnellate e orientata in modo particolare per ottenere un prodotto con una resistenza meccanica eccezionale.

Con i nuovi dischi si possono ottenere strutture estetiche e funzionali, capaci di sopportare qualsiasi carico di masticazione, grazie alla particolare struttura delle fibre utilizzate si possono fresare con qualsiasi tipo di macchina anche di ridotte dimensioni.

Da oggi sono disponibili anche nella versione con rinforzo interno in fibra di carbonio, questo permette di mantenere una buona estetica garantendo però una resistenza ai carichi sorprendente.

Bio Glass Tablet	euro	codice
Rosa spessore 10mm.	115,00	BGTCR9810
Rosa spessore 15mm.	135,00	BGTCR9810
Rosa spessore 20mm.	155,00	BGTCR9810
Dentina spessore 10mm.	115,00	BGTCD9810
Dentina spessore 15mm.	135,00	BGTCD9810
Dentina spessore 20mm.	155,00	BGTCD9810
Naturale spessore 10mm.	115,00	BGTCN9810
Naturale spessore 15mm.	135,00	BGTCN9810
Naturale spessore 20mm.	155,00	BGTCN9810
Rinforzato spessore 10mm.	115,00	BGTRN9810
Rinforzato spessore 15mm.	135,00	BGTRN9810
Rinforzato spessore 20mm.	155,00	BGTRN9810

Dischi in metallo



Solibond C plus blanks CoCr Yeti



Solibond C plus blanks CoCr Yeti

Dischi in metallo CoCr fresabile.

- Ceramizzabile
- Biocompatibile
- Saldabile al laser
- Rapida rifinitura e lucidatura della superficie
- Ottimo legame con la ceramica
- Durezza Vickers: 280HV
- Allungamento: 10,1%
- CET (20 – 600°C) 14,0 - CET (25 – 500°C) 13,9

SOLIBOND C PLUS BLANKS CO-CR Ø98,5mm.

	euro	codice
Spessore 10,0 mm	186,10	969-9010
Spessore 12,0 mm	194,90	969-9012
Spessore 13,5 mm	207,80	969-9013
Spessore 15,0 mm	221,30	969-9015

Colado CAD CoCr4 Ivoclar Vivadent

Dischi in lega al cromo-cobalto indicati per la realizza corone e ponti, strutture per rivestimento estetico, sovracostruzioni a supporto implantare e molto altro. Con Colado CAD CoCr4 si possono fresare anche applicazioni con sezioni di connessione molto sottili, esposti ad elevati carichi. Per il rivestimento estetico si utilizzano i convenzionali materiali da rivestimento estetico (p.es. la metalloceramica IPS Style oppure SR Nexco).

INDICAZIONI: corone rivestite esteticamente; ponti estesi; ponti con piccole sezioni; barre; sovracostruzioni a supporto implantare.

Colado CAD CoCr4 presenta un CET di $14,4 \pm 0,5 \times 10^{-6}/K$.

COLADO CAD CoCr4 Ø 98.5 mm - collare 10 mm

	euro	codice
SPESSORE 8 mm conf. 1 pz	184,00	00122157
SPESSORE 10 mm conf. 1 pz	195,50	00122158
SPESSORE 12 mm conf. 1 pz	207,00	00122159
SPESSORE 13.5 mm conf. 1 pz	215,50	00122160
SPESSORE 15 mm conf. 1 pz	224,50	00122161
SPESSORE 18 mm conf. 1 pz	253,00	00122162
SPESSORE 20 mm conf. 1 pz	287,50	00122163
SPESSORE 24.5 mm conf. 1 pz	333,50	00122164

Colado CAD Ti5 Ivoclar Vivadent

Colado CAD Ti5 sono dischi in lega al titanio. I dischi si utilizzano per la fresatura di corone, ponti estesi nonché sovracostruzioni a supporto implantare. Con il composito da laboratorio SR Nexco si possono rivestire individualmente ed individualmente i restauri, assecondando i desideri del paziente.

Il materiale resistente alla corrosione è biocompatibile e possiede un ridotto potenziale allergenico. Il basso peso specifico del materiale offre ai pazienti un gradevole comfort in cavo orale.

INDICAZIONI Colado CAD Ti5 corone rivestite esteticamente; ponti estesi; ponti con piccole sezioni; barre o sovrastrutture supportate da impianti.

Il campo CET di Colado CAD Ti5 è di $10,3 \pm 0,5 \times 10^{-6}/K$.

COLADO CAD Ti5 Ø 98.5 mm - collare 10 mm

	euro	codice
SPESSORE 8 mm conf. 1 pz	100,00	00123136
SPESSORE 10 mm conf. 1 pz	105,00	00123137
SPESSORE 12 mm conf. 1 pz	110,00	00123138
SPESSORE 13.5 mm conf. 1 pz	115,00	00123139
SPESSORE 15 mm conf. 1 pz	120,00	00123140
SPESSORE 18 mm conf. 1 pz	130,00	00123142
SPESSORE 20 mm conf. 1 pz	140,00	00123143



CupraSintec evo K Whitepeaks

Il primo disco "medio-morbido" al mondo di Co/Cr in 98 mm – fresabile bagnata o asciutta! Il disco è **pre-sinterizzato**, quindi è possibile realizzare strutture più delicate e spessori minimi delle pareti. Il disco non contiene più legante, quindi il tempo di sinterizzazione è notevolmente ridotto, con un conseguente minore consumo di gas argon. Prodotto anche in processo isostatico ad alta pressione, le stesse indicazioni di CopraSintec K. più morbida. Usura molto piccola di frese.

COPRASINTEC evo K	euro	codice
98 Ø x 10 mm	176,70	
98 Ø x 14 mm	216,60	
98 Ø x 18 mm	256,50	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 12mm	191,90	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 16mm	229,90	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 20mm	267,90	

CupraSintec Solid K CoCr Whitepeaks

Disco rigido co/cr **isostatico fabbricato con polveri** metallurgiche

Ottima omogeneità grazie al processo di produzione isostatico ad alta pressione. La fresa minima si consuma a causa dell'estrema omogeneità senza "isole dure" e segregazioni di colata come nei comuni grezzi Co / Cr. Maggiore velocità di fresatura grazie alla migliore lavorabilità (come il titanio) e alla minore durezza Vickers. Fino al 50% di tempo di processo più breve nel vostro sistema di fresatura.

COPRA SINTEC SOLID K	euro	codice
98 Ø x 8 mm	180,50	
98 Ø x 12 mm	208,05	
98 Ø x 15 mm	246,05	
98 Ø x 20 mm	281,20	
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 12mm		
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 16mm		
Sist. Amann Girrbach Ceramill Motion 72er 20mm		

Cupra Bond K CoCr Whitepeaks

Disco duro, **da fusione** Co/Cr - non fabbricato in polvere metallurgica. Sbozzo di fresatura al cromo-cobalto resistente al nichel e berillio, resistente alla fresatura, appositamente configurato per i requisiti della tecnologia CAD / CAM. Il materiale è ben lavorabile e molto omogeneo per un materiale fuso.


COPRA BOND K	euro	codice
98 Ø x 8 mm	216,60	
98 Ø x 12 mm	260,30	
98 Ø x 15 mm	303,05	
98 Ø x 20 mm	348,65	

Cupra Ti Whitepeaks

Disco di titanio puro di alta qualità (grado 2, 4, 5)

Qualità costante garantita con microstruttura estremamente fine per la tecnica di corone e ponti, nonché restauri e sovrastrutture delle barre nelle regioni anteriore e posteriore (intervallo di indicazioni in base al grado di durezza). Sono applicabili tutte le ceramiche per il titanio.

COPRA Ti	euro	codice
98 Ø x 8 mm Ti2, Ti4	100,70	
98 Ø x 15 mm Ti2, Ti4	142,50	
98 Ø x 20 mm Ti2, Ti4	180,50	
98 Ø x 8 mm Ti5	100,70	
98 Ø x 15 mm Ti5	142,50	
98 Ø x 20 mm Ti5	180,50	

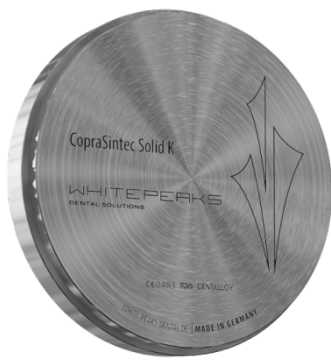

Dischi calcinabili

ProArt CAD Wax Ivoclar

Dischi in cera, in qualità di materiali ausiliari CAD/CAM, supportano i diversi processi e coprono un ampio spettro di indicazioni. I dischi sono facilmente fresabili e presentano un'elevata stabilità.

ProArt CAD Wax yellow si utilizza nella tecnica di pressatura. La cera è specificatamente calibrata con la vetroceramica al disilicato di litio IPS e.max Press. Il materiale è interamente calcinabile ed ha un buon legame con le cere ProArt Model e Cervical. Indicazioni: restauri calcinabili per la tecnologia di pressatura.

PROART CAD WAX CALCINABILE collare 10 mm	euro	codice
YELLOW Ø 98,5 mm - sp. 16 mm conf. 1 pz	35,00	00121380
YELLOW Ø 98,5 mm - sp. 20 mm conf. 1 pz	39,00	00121381

I dischi sono facilmente fresabili e presentano un'elevata stabilità. ProArt CAD Wax pink serve alla realizzazione di prove in cera e valli occlusali individuali in protesi totale. I dischi possono essere utilizzati anche per la realizzazione convenzionale in tecnica di iniezione e pressatura, in quanto la cera è eliminabile con acqua bollente indicazioni valli occlusali in cera e prove funzionali.

PROART CAD WAX CALCINABILE collare 10 mm	euro	codice
PINK Ø 98,5 mm - sp. 30 mm conf. 1 pz	39,00	00121379

I dischi sono facilmente fresabili e presentano un'elevata stabilità. ProArt CAD Wax blu Si utilizza in tecnica di fusione, per la modellazione di corone e ponti. Grazie all'elevato punto di fusione, i dischi in cera si possono lavorare facilmente senza imbrattamenti. La stabilità termica consente anche la realizzazione con precisione di restauri estesi. ProArt CAD Wax blue è interamente calcinabile per la tecnologia di fusione.

PROART CAD WAX CALCINABILE collare 10 mm	euro	codice
BLU Ø 98,5 mm - sp. 12 mm conf. 1 pz	30,00	00121377
BLU Ø 98,5 mm - sp. 20 mm conf. 1 pz	39,00	00121378

CeraWax Concept

Cera calcinabile per la modellazione di strutture realizzate con la tecnica di fusione. Brucia senza lasciare residui.

DISCO CERA CON COLLARE SISTEMA WIELAND	euro	codice
BLU Ø 98 sp. 15 collare h 10 mm conf. 1 pz	22,00	00102943
BLU Ø 98 sp. 20 collare h 10 mm conf. 1 pz	24,00	00102944

Cad / Cam dischi in cera per scheletrati Yeti

Forma e volume stabile, resistente alla rottura, permette profili precisi, ideale per lavori di scheletrica.

DISCO CERA SCHELETRICA YETI Ø 98,5mm.	euro	codice
Spessore 20,0 mm. medio	22,40	795-0020
Spessore 25,0 mm. duro	26,90	795-0025
Spessore 30,0 mm. medio	26,90	795-0030



CeraWax Concept



Cad/cam dischi scheletrati Yeti

Dischi calcinabili



Argen Wax

ArgenWax Dent-Gold

Disco di cera calcinabile per fresatori.

- 100% bruciatura senza residui
- Formula unica per fresaggio ad alta velocità
- Colore grigio neutro per ottima definizione dei particolari
- Facile lavorabilità
- Ottimi risultati con ceramiche pressate o fusione di metalli

ARGEN WAX		euro	codice
Diametro 98 mm.	altezza 18mm.	24,02	115968
Diametro 100 mm. per Dentmill	altezza 18mm.	24,02	116068
Z95 Zirkonzhan	altezza 18mm.	24,02	116075



Cupra Wax Whitepeaks

Dischi in cera calcinabile, non lascia residui.

- Disponibili anche per sistemi ZZ e Amann Girrbach

COPRA WAX		euro	codice
Ø 98mm	altezza 12mm.	22,80	
Ø 98mm	altezza 26mm.	22,80	
Ø 98mm	altezza 20mm.	22,80	
Ø 98mm	altezza 25mm.	22,80	

PMMA Cast Concept

Resina in polimetilmetacrilato completamente calcinabile per realizzare corone e ponti tramite fusione e sovrappressatura. Utile per effettuare prove strutturali nel cavo orale prima di procedere alla fresatura della Zirconia. Brucia senza lasciare residui.

PMMA CAST CON COLLARE SISTEMA WIELAND / Ø98mm / h collare 10 mm

colore	AVORIO	BLU	AVORIO	BLU
altezza	16	16	20	20
codice	00099132	00099133	00099134	00099135
prezzo	22,50	22,50	25,80	25,80
conf.	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz



PMMA Cast Concept



Cupra Plex calcinabili Whitepeaks

Dischi in PMMA per la tecnica a cera persa

- Brucia senza lasciare residui
- Disponibile trasparente, blu o avorio
- Disponibili anche per sistemi ZZ e Amann Girrbach

COPRA PLEX		euro	codice
Ø 98mm	altezza 15mm.	20,90	
Ø 98mm	altezza 20mm.	20,90	
Ø 98mm	altezza 25mm.	20,90	



Solibond C Plus Yeti



Metallo in polvere per laser sinterizzazione

Solibond C plus Polvere Yeti

Lega Cobalto-Cromo per applicazioni laser.
Solibond C plus polvere con il suo spettro di -10 / +63 my è prodotta in Germania con qualità di produzione controllata sotto gas inerte.
Ogni lotto è rilasciato solo dopo il superamento di severi test.
Solibond C Plus polvere è raccomandata per l'uso con SLM 50

SOLIBOND C PLUS	euro	codice
Confezione da 5 Kg.	1.755,80	969-5000

Coloranti

VITA AKZENT Plus Vita

Nuovi settori di impiego richiedono materiali nuovi e versatili. Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente e caratterizzare in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

Che si tratti della cromatizzazione interna di un restauro, di una caratterizzazione superficiale o di una leggera velatura - con i nuovi supercolori fluorescenti VITA AKZENT Plus il lavoro riesce sicuro e semplice. I supercolori VITA AKZENT Plus offrono differenti opzioni di lavorazione e settori di impiego. supercolori BODY STAINS per glasura e GLAZE sono disponibili anche come spray, che assicura una stesura uniforme e omogenea su ampie superfici senza dispersioni. Negli spray la nuova speciale testina nebulizzatrice consente un'applicazione mirata. Vantaggi: per tutti i tipi di materiali ceramici dentali, dalle ceramiche di stratificazione e pressatura, ai blocchetti in ceramica feldspatica fino a restauri monolitici.

VITA AKZENT PLUS

euro codice

KIT POLVERE **a richiesta** 00096295
 Confezione: 4 Effect stains da 3 gr + 5 Body stains da 3 gr + 1 Glaze da 5 gr + 1 LT da 5 gr + 1 Finishing Agent da 5 gr + liquido per polvere da 20 ml + accessori

VITA AKZENT PLUS

euro codice

BODY STAINS POLVERE conf. da 3 gr **12,90** TABELLA

BS01 giallo	BS02 giallo-marrone	BS03 arancio	BS04 oliva-grigio
00097969	00097970	00097971	00097972
BS05 grigio-marrone			
00097973			

VITA AKZENT PLUS

euro codice

EFFECT STAINS POLVERE conf. da 3 gr **12,90** TABELLA

ES01 bianco	ES02 crema	ES03 giallo limone	ES04 giallo sole
00097584	00097974	00097975	00097583
ES05 arancio	ES06 rosso ruggine	ES07 cachi	ES08 rosa
00097976	00097630	00097631	00097977
ES09 rosso scuro	ES10 lilla	ES11 blu	ES12 grigio blu
00097978	00097979	00097980	00097981
ES13 grigio	ES14 nero		
00097585	00097982		

VITA AKZENT PLUS

euro codice

GLAZE POLVERE	conf. da 5 gr	15,30	00097997
GLAZE LT POLVERE	conf. da 5 gr	13,10	00097999
FINISHING AGENT POLVERE	conf. da 5 gr	18,95	00097613





VITA AKZENT Plus



VITA AKZENT PLUS

			euro	codice
KIT PASTA			a richiesta	00095745
Confezione: 4 Effect stains Paste da 4 gr + 5 Body stains Paste da 4 gr + 1 Glaze Paste da 4 gr + 1 Glaze LT Paste da 4 gr + 1 Finishing Agent Paste da 4 gr + liquido per pasta da 15 ml + accessori				
VITA AKZENT PLUS			euro	codice
BODY STAINS PASTA			conf. da 4 gr	16,20
BS01 giallo	BS02 giallo-marrone	BS03 arancio	BS04 oliva-grigio	TABELLA
00097359	00097360	00097361	00097362	
BS05 grigio-marrone				
00097363				

VITA AKZENT Plus Vita

VITA AKZENT PLUS			euro	codice
EFFECT STAINS PASTA			conf. da 4 gr	16,20
ES01 bianco	ES02 crema	ES03 giallo limone	ES04 giallo sole	ES05 arancio
00097983	00097984	00097985	00097986	00097987
ES07 Cachi	ES08 rosa	ES09 rosso scuro	ES10 lilla	ES11 blu
00097988	00097989	00097990	00097991	00097992
ES13 Grigio	ES14 nero			00097993
00097994	00097995			

VITA AKZENT PLUS			euro	codice
GLAZE PASTA			conf. da 4 gr	16,30
GLAZE LT PASTA			conf. da 4 gr	16,50
FINISHING AGENT PASTA			conf. da 4 gr	16,20

VITA AKZENT PLUS			euro	codice
KIT SPRAY			a richiesta	00098002
Confezione: 5 body Spray da 75 ml + 1 Glaze Spray da 75 ml + accessori				

VITA AKZENT PLUS			euro	codice
BODY STAINS SPRAY			conf. da 75 ml	77,80
BS01 giallo	BS02 giallo-marrone	BS03 arancio	BS04 oliva-grigio	BS05 grigio-marrone
00098004	00098006	00098007	00098009	00098010

VITA AKZENT PLUS			euro	codice
GLAZE SPRAY			conf. da 75 ml	61,00
GLAZE LT SPRAY			conf. da 75 ml	61,00
POWDER FLUID			conf. da 20 ml	9,40
PASTE FLUID			conf. da 15 ml	11,85

VITA AKZENT Plus Chroma Stains Vita

Supercolori per il controllo del croma nei restauri ceramici, offrono una semplice modifica del croma in un solo passaggio mediante una cottura dei supercolori; intensificazione mirata della saturazione secondo una chiara sistematica e un uso universale per tutte le ceramiche, indipendente dal CET. VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS A-D sono colori aggiuntivi della gamma VITA AKZENT Plus.

VITA AKZENT PLUS CHROMA			euro	codice
STAINS POLVERE SET			64,90	00117266
Confezione: 4 Vita Akzent Plus Chroma Stains da 3 gr (Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D) + 1 Vita Akzent Plus Powder Fluid da 20 ml + 1 scala colori				
STAINS POLVERE			conf. 3 gr	12,90
CHROMA A	CHROMA B	CHROMA C	CHROMA D	
00117267	00117268	00117269	00117270	



Vita YZ Vita



GC Initial IQ-Lustre LP NF



GC Initial IQ-Lustre LP NF

VITA COLORI PER YZ T			euro	codice
COLORING LIQUID	SET	conf. 4 flaconi da 100 ml	152,00	00104053
COLORING LIQUID	LIGHT	flacone da 250 ml	81,50	00104054
COLORING LIQUID	MEDIUM	flacone da 250 ml	81,50	00104056
COLORING LIQUID	INTENSE	flacone da 250 ml	37,85	00104057
COLORING LIQUID	NEUTRAL	flacone da 250 ml	37,85	00104058

VITA SHADE PER YZ HT			euro	codice
CLASSICAL STARTER SET			a richiesta	00104060
SHADE LIQUID	flacone	da 50 ml	30,70	TABELLA
A1	A2	A3	A3.5	
00104061	00104062	00104063	00104064	
B2	C2	D2		
00104065	00104066	00104067		

VITA SHADE PER YZ HT			euro	codice
SHADE LIQUID	flacone	da 20 ml	67,85	TABELLA
CROMA A	CROMA B	CROMA C	CROMA D	
00104068	00104069	00104070	00104071	
PINK	GREY	BLUE		
00104072	00104073	00104074		

VITA SHADE PER YZ HT			euro	codice
LIQUID INDICATOR	flacone	da 10 ml	16,90	00104075
LIQUID STABILIZZATORE	flacone	da 50 ml	52,50	00104076

Initial IQ-Lustre LP NF GC

Paste a base di particelle fini di ceramica, in gel, tissotropiche, specifiche per la colorazione superficiale di restauri in ceramica integrale. Intervallo di CET ampio (tra 6,9 e 13,3) per lavorare su quasi tutti i tipi di ceramica. Realizzati per offrire un'eccellente profondità cromatica e traslucenza naturale. Disponibili in vasetti pronti all'uso.

IQ-LUSTRE LP NF			euro	codice
PASTE SET			a richiesta	00078858
<i>conf. 1 Neutral da 4 gr + 1 Value da 4 gr + 4 Body Shade da 4 gr (A, B, C, D) + 8 Effect smalto da 4 gr (Vanilla, White, Light grey, Dark grey, Light blue, Inciso, 1 Olive, 1 Value) + 1 liquido per Diluent da 8 ml + 1 liquido Refresh da 8 ml + accessori</i>				
PASTE NEUTRAL		vasetto da 4 gr	57,65	00078789
COMBI PACK	PASTE NEUTRAL	conf. 3 vasetti da 4 gr	138,90	00099752
BODY SHADE		vasetto da 4 gr	57,65	TABELLA
	A	B	C	D
BODY SHADE	00078788	00078790	00079005	00079006

IQ-LUSTRE LP NF ENAMEL SHADE			euro	codice
vasetto da 4 gr			57,65	TABELLA
1 VANILLA	2 WHITE	3 LIGHT GREY	4 DARK GREY	5 LIGHT BLUE
00079092	00079339	00079093	00078595	00079340
6 DARK BLUE	7 INCISO	8 OLIVE	V VALUE	
00079094	00078596	00079007	00079008	

Initial IQ-Lustre LP NF GC

- Liquido diluente per ottenere la consistenza desiderata per la specifica applicazione.
- Liquido umettante per il mantenimento delle proprietà tissotropiche delle paste. Si utilizza per recuperare le paste che si sono seccate e ottenere una consistenza simile ad un gel senza modificarne le caratteristiche fisiche.

IQ-LUSTRE LP NF			euro	codice
LIQUIDO DILUENTE	flacone	da 8 ml	17,70	00066350
LIQUIDO UMETTANTE	flacone	da 8 ml	17,70	00079009

Coloranti

Aqua-p Concept

Liquidi coloranti a base d'acqua per la colorazione di strutture di Ossido di Zirconio. Non influenzano la densità, la resistenza meccanica e la durezza della protesi dopo sinterizzazione. A base d'acqua, privi di acidi, non danneggiano le resistenze del forno di sinterizzazione; non corrodono gli strumenti in metallo; l'infiltrazione è rapida e profonda devono essere diluiti in acqua distillata. Ideali per la colorazione a pennello.

AQUA-P				euro	codice
conf. 30 ml				20,00	TABELLA
A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
00102648	00102649	00100034	00100109	00102650	00102651
B2	B3	B4	C1	C2	C3
00102652	00100035	00102653	00102654	00102655	00102656
C4	D2	D3	D4		
00102657	00102658	00102659	00102660		

AQUA-P MARGINAL				euro	codice
conf. 30 ml				36,70	TABELLA
M1 A1/B1	M2 A2/A3	M3 A3.5/A4	M4 B2/B3	M5 B4/D3	
00102664	00100036	00102665	00102666	00100037	
M6 C1/C2	M7 C3/C4	M8 D2/D4			
00102667	00102668	00102669			

AQUA-P OCCLUSAL				euro	codice
conf. 15 ml				31,70	TABELLA
BLU	GRIGIO	AMBRA	VIOLETTO	GIALLO	
00100038	00100039	00100276	00100277	00102670	
MARRONE	ROSA	GRIGIO/BLUE			
00102972	00102671	00104243			

AQUA-P LIGHTER		euro	codice
DILUENTE SCHIARENTE CON PIPETTA	conf. 30 ml	16,70	00102675

AQUA-P BLOCK		euro	codice
LIQUIDO IMPERMEABILIZZANTE	conf. 15 ml	25,00	00102672


Dip & Brush Yeti

Liquidi coloranti per strutture di ossido di zirconio, utilizzabili sia con la tecnica di immersione che con la tecnica di colorazione.

DIP & BRUSH		euro	codice
A1	conf. 100 ml	49,20	397-5001
A2	conf. 100 ml	49,20	397-5002
A3	conf. 100 ml	49,20	397-5003
A3,5	conf. 100 ml	49,20	397-5004
B2	conf. 100 ml	49,20	397-5007
C2	conf. 100 ml	49,20	397-5011
D2	conf. 100 ml	49,20	397-5014
BL1 (blu)	conf. 100 ml	60,00	397-5017
GR3 (grigio)	conf. 100 ml	60,00	397-5019
Stain	conf. 2 gr.	24,70	340-02xx
K2 Glasur	conf. 5 gr.	42,00	336-0010



Aqua-p Concept

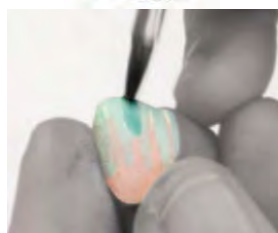


Dip & Brush Yeti

Bteeth Colori Bteeth

Linea di colorazione per zirconia pre-sinterizzata, che permette una colorazione completa del restauro protesico, evitando, in caso di ritocchi, zone perlacee non colorate. Le colorazioni della linea Bteeth sono basate sulla presenza di cromofori dei metalli di transizione i quali presentano più stati di valenza, in modo da ottenere tutti i colori della scala Vita.

BTEETH COLORE ZIRCONIA

					euro	codice
penna da 6 ml					35,00	TABELLA
A1	A2	A3	A3.5	A4		B1
LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT		LIGHT
00111245	00111246	00111247	00111248	00111249		00111250
B2	B3	B4	C1	C2		C3
LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT		LIGHT
00111251	00111252	00111253	00111254	00111255		00111257
C4	D2	D3	D4	BLU		BLU
LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT			MEDIUM
00111258	00111259	00111260	00111261	00111244		00111264
BLU	GRIGIO	GRIGIO	GRIGIO			GRIGIO
LIGHT	MEDIUM	LIGHT	COMPLESSO			COMPLESSO
			LIGHT			MEDIUM
00111265	00111262	00111263	00111268			00111269
ORANGE		OCRA	PINK			PINK
			MEDIUM			LIGHT
00111266		00111267	00111270			00111271

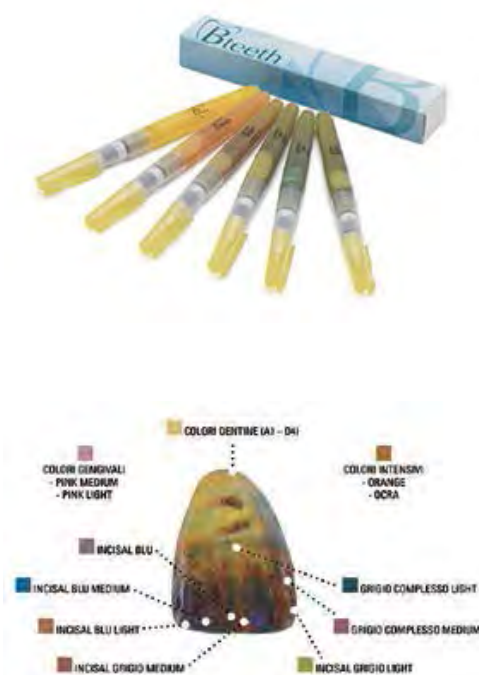

IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids Ivoclar Vivadent

Colorazione per Ips e.Max ZirCad LT tramite infiltrazione a pennello di restauri e strutture, interamente anatomici prima del processo di sinterizzazione. Liquidi coloranti per infiltrazione in 16 colori dentali A-D, cinque liquidi Effect per l'infiltrazione individuale.

IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids

	euro	codice
STANDARD KIT	a richiesta	00121623
conf. 3 IPS e.Max ZirCad LT Colouring Liquid da 60ml (A1,A2,A3) + 4 IPS e.Max ZirCad LT Colouring Liquid da 15ml (VIOLET, ORANGE, BROWN, BLUE) + 3 IPS e.Max ZirCad Colouring Liquid Indicator da 15ml (RED, BLUE, YELLOW) + accessori		

ZIRCAD LT COLOR LIQUID flacone da 60 ml

euro **39,85**

A1	A2	A3	A3.5
00121578	00121579	00121580	00121581
A4	B1	B2	B3
00121582	00121583	00121584	00121585
B4	C1	C2	C3
00121586	00121589	00121590	00121591
C4	D2	D3	D4
00121592	00121593	00121594	00121595

ZIRCAD LT COLOR LIQUID EFFECT flacone da 15 ml

euro **44,95**

BLU	VIOLET	GREY	ORANGE	BROWN
00121587	00121599	00121596	00121597	00121588

ZIRCAD COLOR LIQUID INDICATOR flacone da 15 ml

euro **18,10**

BLU	RED	YELLOW
00121575	00121576	00121577

DILUTER flacone da 60 ml

euro **18,20** 00121574

IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids Ivoclar Vivadent

ZIRCAD COLOR LIQUID BRUSH

	euro	codice
PENNELLINO N. 1 conf. 1 pz	7,80	00121571
PENNELLINO N. 3 conf. 1 pz	7,80	00121572
PENNELLINO N. 5 conf. 1 pz	9,80	00121573



IPS e.max ZirCAD MT Colouring Liquids Ivoclar Vivadent

Colorazione per Ips e.Max ZirCad MT e MT Multi tramite infiltrazione a pennello prima del processo di sinterizzazione. Liquidi coloranti per infiltrazione in 16 colori dentali A-D, cinque liquidi Effect per l'infiltrazione individuale.

IPS e.max ZirCAD MT Colouring Liquids

euro codice

STANDARD KIT

a richiesta 00121620

conf. 3 IPS e.Max ZirCad MT Colouring Liquid da 60 ml (A1,A2,A3) + 4 IPS e.Max ZirCad MT Colouring Liquid da 15 ml (VIOLET, ORANGE, BROWN, BLUE) + 3 IPS e.Max ZirCad Colouring Liquid Indicator da 15 ml (RED, BLUE, YELLOW) + accessori

ZIRCAD MT COLOR LIQUID flacone da 60 ml

euro **39,85**

A1	A2	A3	A3.5
00121600	00121601	00121602	00121603
A4	B1	B2	B3
00121604	00121605	00121606	00121607
B4	C1	C2	C3
00121608	00121611	00121612	00121613
C4	D2	D3	D4
00121614	00121615	00121616	00121617

ZIRCAD LT COLOR LIQUID EFFECT flacone da 15 ml

euro **44,95**

BLU	VIOLET	GREY	ORANGE	BROWN
00121609	00121621	00121618	00121619	00121610

ZIRCAD COLOR LIQUID INDICATOR flacone da 15 ml

euro **18,10**

BLU	RED	YELLOW
00121575	00121576	00121577

DILUTER flacone da 60 ml

euro **18,20** 00121574

ZIRCAD COLOR LIQUID BRUSH

euro codice

PENNELLINO N. 1 conf. 1 pz	7,80	00121571
PENNELLINO N. 3 conf. 1 pz	7,80	00121572
PENNELLINO N. 5 conf. 1 pz	9,80	00121573

Nacera Classic Liquid Nacera

Nacera classic liquid sono disponibili nelle 16 tonalità VITA, sono compresi inoltre diversi effetti in modo da garantire l'intero spettro cromatico. Estremamente flessibili ed adattabili permettono di ottenere dei restauri unici e personali. Si ottengono così dettagli precisi nella zona interprossimale, cervicale, e dei mamelloni. I liquidi possono essere applicati direttamente con tecnica a pennello o per immersione. Nacera Classic Liquid sono sviluppati per i prodotti Nacera Zirconia Pearl: massima tonalità, consistenza, estetica ed efficienza. Si infiltrano in profondità e riducono eventuali punti bianchi dovuti al fresaggio. Si possono usare sia a pennello che ad immersione. Pronti all'uso, non richiedono aggiunta di solventi o di altri componenti.

BODY

euro codice

conf. 50 ml

44,10

TABELLA

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00110213	00110214	00110215	00110216	00110217	00110218	00110220	00110221
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00110222	00110223	00110224	00110225	00110226	00110227	00110228	00110229

NACERA CLASSIC LIQUID

euro codice

ENAMEL 1 flacone 20 ml	23,10	00110230
ENAMEL 2 flacone 20 ml	23,10	00110231
EFFECT BLUE flacone 20 ml	37,80	00110232
EFFECT BROWN flacone 20 ml	37,80	00110234
EFFECT GREY flacone 20 ml	37,80	00110233
EFFECT ORANGE flacone 20 ml	37,80	00110235
LIQUID DILUITING flacone 50 ml	17,90	00110236



Forni per sinterizzazione

Programat S1-1600 Ivoclar Vivadent



Il forno Programat S1 1600 è un moderno, compatto forno ad elevate temperature per la sinterizzazione di materiali a base di ZrO₂ ad una temperatura fino a 1600°C. Caratteristiche e vantaggi: Processo di sinterizzazione fino a 1600°C - Rapidi tempi di lavorazione (75 minuti per denti singoli) - Elevata precisione di adattamento dei restauri sinterizzati - Basso consumo energetico e maggiore efficienza energetica (Power Saving Technology) - Possibilità di calibratura della temperatura - Optical Status Display - Dimensioni compatte e peso ridotto (27 kg) - Praticità nella manutenzione grazie alla cappa rimovibile - Robusta tastiera a membrana.

Dotato di un piano di sinterizzazione a due piani (Programat Dosto Tray) con cui è possibile aumentare la capacità di sinterizzazione del 40% ca. Oltre ai programmi Ivoclar Vivadent pre-installati, sono disponibili ancora più programmi individuali (fino a 28 programmi).

	euro	codice
FORNO PROGRAMAT S1-1600	a richiesta	00108697

Tabeo Mihm Vogt

Forni di sinterizzazione di dimensioni compatte, consentono temperature massime di sinterizzazione fino a 1400°C / 1650°C. Grazie a questa peculiarità non si hanno più limitazioni nell'utilizzo delle varie tipologie di ossido di zirconio. Gli elementi riscaldanti in MoSi₂ (Disiliciuro di Molibdeno) della versione M sono progettati per arrivare fino a 1650°C, questo range di utilizzo garantisce una lunga durata degli elementi. Gli elementi riscaldanti SiC (carburo di silicio) della versione S vengono utilizzati fino a 1550°C, e garantiscono l'assenza di variazioni cromatiche delle lavorazioni in zirconio. Con i nostri apparecchi per tecnici odontoiatrici corrispondiamo ai più alti requisiti per quanto riguarda la prestazione, l'affidabilità e la funzionalità, garantendo dunque procedure prive di difficoltà e altissima qualità nel protetica dentale. Grazie al costante sviluppo delle apparecchiature implementiamo soluzioni pratiche e orientate al futuro per delle applicazioni esigenti. I materiali scelti e la lavorazione priva di compromessi rendono i prodotti della Mihm-Vogt particolarmente affidabili e duraturi. Allo stesso tempo puntiamo su procedimenti di lavorazione e materiali ecologici.

FORNO TABEO	euro	codice
TABEO-1 S ZIRKON 9250	a richiesta	00120855
TABEO-1 M ZIRKON 9270	a richiesta	00119497
TABEO-2 S ZIRKON 9260	a richiesta	00122664
TABEO-2 M ZIRKON 9280	a richiesta	00120631
TABEO-2 M METAL 9290	a richiesta	00119710

Tabeo Mihm Vogt

	TABEO-1/M/ZIRKON	TABEO-2/M/ZIRKON	TABEO-1/S/ZIRKON	TABEO-2/S/ZIRKON	TABEO-2/M/METAL
riscaldamento	classico	classico	classico	classico	metallo
temperatura max	1650°C	1650°C	1550°C	1550°C	1400°C
elementi riscaldanti	pc4. MoSi	pc4. MoSi	pc4. Sic	pc4. Sic	pc4. MoSi
Riscald. Program. max	25°C/min.	25°C/min.	25°C/min.	25°C/min.	40°C/min.
ciotola di sinterizzazione	1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	1 x 100/30 mm
programmi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti fissi, 5 programmi liberi
termocoppia	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S
porto RS 232	si	si	si	si	si
potenza max	1500W	1800W	1700W	2000W	1600W
peso	55 kg	80 kg	60 kg	85 kg	80 kg
dimensioni L/P/H	400/400/600 mm	480/460/680	400/400/600 mm	480/460/680	530/460/680

Forni ad Alta Temperatura HT e HTS Mihm Vogt

I forni ad alta temperatura della serie HT offrono funzioni specifiche oltre ad un gran numero di funzioni sia standard che speciali. Questi sono adatti sia per moderati che per alti carichi di lavoro, ideale complemento ai sistemi CAD/CAM per laboratori e centri di fresatura. I forni sono facili da usare ed offrono semplici operazioni di funzionamento con un display di facile comprensione. Disponibili con programmi personalizzabili e test aggiuntivi che rendono il lavoro ancora più facile. La camera di grande volume che può ospitare fino ad un massimo di due grandi ciotole per sinterizzazione da Ø 120 mm, consente la realizzazione di strutture e fino a 50 corone singole. La variante HT Speed consente un riscaldamento rapido per ridurre notevolmente i tempi di processo in funzione del materiale trattato e permette una lavorazione ancora più efficiente.

I forni di sinterizzazione della serie HT-S sono il complemento ideale per tutti i sistemi e materiali CAD/CAM per laboratori con moderato o medio carico di lavoro. I programmi personalizzabili semplificano la gestione mentre la porta sollevabile consente un comodo posizionamento del materiale da sinterizzare. Ulteriori caratteristiche sono la ottimale distribuzione del calore nella camera di riscaldamento ed una capacità sufficiente per un vassoio per sinterizzazione da Ø 100 mm per un massimo di 20 corone singole.



	euro	codice
HTS SPEED 9501	a richiesta	00086513
HTS-2 M ZIRKON 9550	a richiesta	00123493
HT-2 M ZIRKON 9650	a richiesta	00123494
HTS-1 M METAL 9570	a richiesta	00123495
HTS-2 M METAL 9575	a richiesta	00123496

Forno Zyrcomat Vita

Forno Premium per sinterizzazione HighSpeed :

- per tutti i materiali ceramici dentali sinterizzabili
- per la sinterizzazione ad alta velocità in 80 min.
- per ponti fino a 9 elementi
- per tutti i materiali VITA In-Ceram YZ (ZrO₂ bianco, precromatizzato industrialmente e manualmente)
- sinterizzazione rispettosa dei materiali con raffreddamento a 400°C



	euro	codice
FORNO ZYRCOMAT 6000MS	a richiesta	00094869



LHT 03/17 D Nabertherm

LHT 03/17 D Nabertherm

Forno a camera ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido

L'eccellente lavorazione di materiali pregiati che lo contraddistingue abbinata alla facilità d'uso sta alla base della straordinaria versatilità di questo modello nel laboratorio dentale. Il forno ad alta temperatura è ideale anche per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio traslucido.

Le resistenze riscaldanti speciali in disiliciuro di molibdeno libere offrono la migliore protezione dalle interazioni chimiche tra la carica e le resistenze. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.

Le unità di zirconio vengono posizionate in contenitori di ceramica. Nel forno possono essere impilati fino a tre contenitori.



LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

LHT 02/17 LB Speed Nabertherm

Forno a sollevamento ad alta temperatura fino a 1650 °C per la sinterizzazione della zirconia traslucida con raffreddamento rapido

Considerata la temperatura massima di 1650 °C, questo modello è ideale per la sinterizzazione di ossido di zirconio traslucido. Il piano sollevabile elettrico semplifica notevolmente il caricamento del forno. Il riscaldamento circolare della camera circolare del forno garantisce l'uniformità ottimale della temperatura.

Grazie alle speciali resistenze riscaldanti in disiliciuro di molibdeno, le corone e i ponti vengono protetti al meglio da possibili contaminazioni chimiche. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione. Gli elementi da sinterizzare vengono collocati in contenitori in ceramica tecnica. La possibilità di impilare fino a tre contenitori di carica garantisce una produttività elevata.

Il modello LHT 02/17 LB Speed è dotato anche di raffreddamento rapido.

Il tavolo sopra il controller viene abbassato automaticamente in modo graduale. In base alla carica inserita e ai contenitori di carica, con questo forno si possono realizzare tempi ciclo completi della durata di meno di due ore.



HTCT 01/16 Nabertherm

HTCT 01/16 Nabertherm

Forno ad alta temperatura con riscaldamento a barre di SiC per la sinterizzazione di ossido di zirconio fino a 1550 °C

Realizzati in versione da banco con barre di riscaldamento SiC, questo modello offre molteplici vantaggi alla sinterizzazione di ossido di zirconio. Grazie alla grande camera e ai brevi tempi di riscaldamento, questo modello è la giusta scelta per lavorazioni CAD/CAM di ossido di zirconio. Il controller del forno è liberamente programmabile per consentire la sinterizzazione individuale del materiale di zirconio. Inoltre il modello HTCT 01/16 è predisposto per il collegamento alla rete monofase. Se si utilizzano soluzioni coloranti controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione.